

Check-list avant utilisation

- 1 Colposcope
- 2 Objectif fixe ou à focale variable (variofocus)


Éléments additionnels

- 3 Adaptateur vidéo
- 4 iCare mini
- 5 Support moniteur
- 6 Moniteur Neovo
- 7 iPad
- 8 Licence imagyn colposcopie

Quick-start Colposcope



1 Allumer le colposcope à l'aide de l'interrupteur situé sur le bras, activer la source de lumière avec la molette inférieure et régler l'intensité lumineuse avec la molette du milieu.

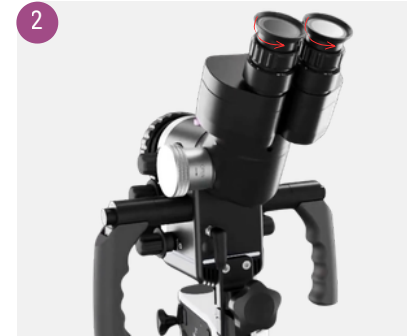

2 Visser complètement l'ocillon en présence de lunettes. Dévisser l'ocillon en l'absence de lunettes.




3 Regarder dans les oculaires et ajuster la distance interpupillaire jusqu'à ce que les images perçues par chaque œil se superposent.



4 En cas de myopie et/ou hypermétropie, cibler la vision sur un objet dans la pièce. Positionner le colposcope à la distance focale adéquate (~40 cm en présence du VarioFocus), puis régler la hauteur de la tête optique à l'aide des deux poignées dédiées.




5 Régler la dioptrie sur "0" (la ligne est face aux points), puis réaliser une netteté grossière au plus faible grossissement "0.4x". Puis une netteté précise en réglant la molette sur le plus grand grossissement "2.5x".

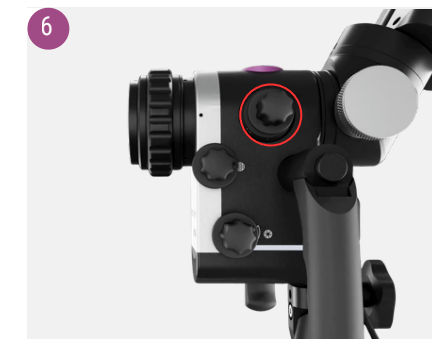


6 Sans déplacer la tête du colposcope ou la mise au point, retourner au plus faible grossissement.


Quick-start Colposcope

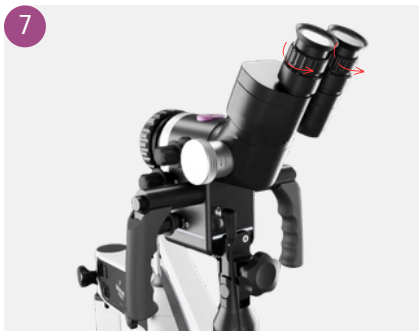


Après retrait des lunettes, ajuster la dioptrie de chaque oculaire séparément (en fermant l'autre oeil) jusqu'à obtenir une image parfaitement nette dans chaque oeil. Noter les valeurs.

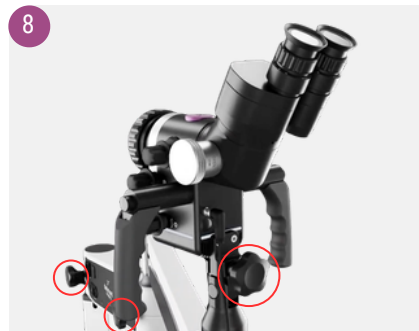


Les molettes de réglage noires peuvent être serrées ou desserrées afin d'ajuster la dureté de rotation des bras selon les préférences de l'utilisateur.

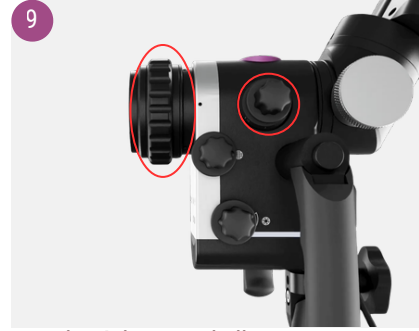


Pour la réalisation de l'examen, positionner le colposcope face à la patiente, à la distance adéquate et au plus faible grossissement. Si variofocus, tourner la bague de mise au point sans bouger la tête jusqu'à ce que l'image soit nette.

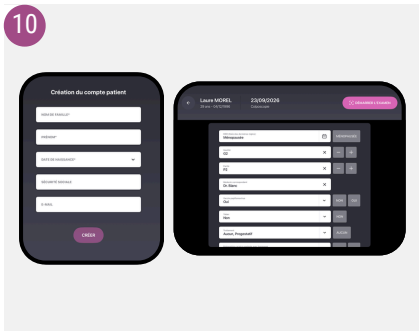


Lancer l'application imagyn sur l'iPad. Créer le dossier de la patiente (si non existant), remplir le questionnaire pré-examen et cliquer sur "Démarrer".

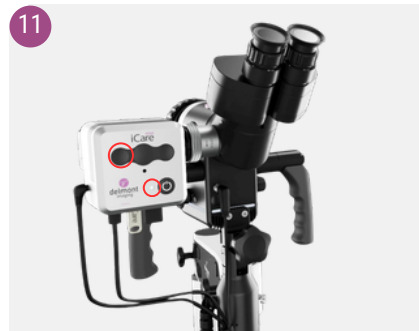


Sortir iCare mini du mode veille (voyant lumineux fixe). Puis faire une balance des blancs à l'aide d'un appui long sur le bouton situé à gauche.

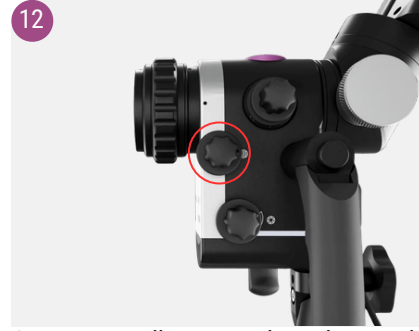


Commencer l'examen du col avec le colposcope. Si souhaité, tourner la molette pour activer le filtre vert.

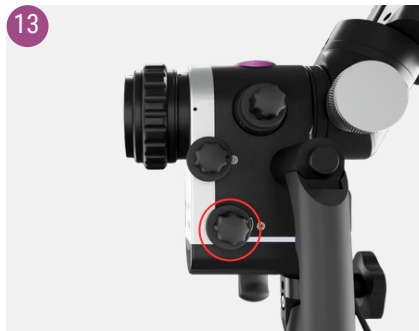

Si souhaité, tourner la molette dédiée au diaphragme pour focaliser la surface éclairée sans en modifier l'intensité lumineuse.

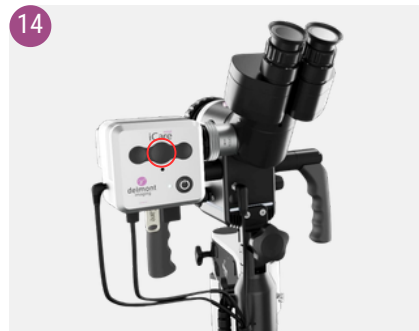

Faire un appui court sur le bouton central de l'iCare mini pour prendre une photo. Faire un appui long pour prendre une vidéo.

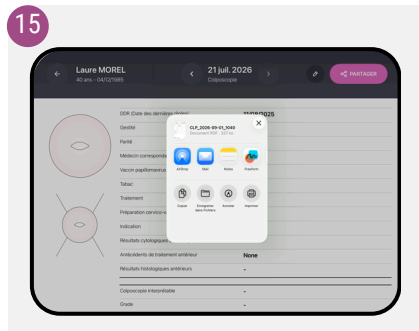

Le compte-rendu d'examen est disponible depuis l'application. Il est possible de le partager directement avec la patiente.



Scanner ce QR code pour accéder à la vidéo 3D du colposcope :



297 avenue du Mistral
13600 La Ciotat, FRANCE



contact@delmont-imaging.com



+33 (0)9 51 51 30 30



www.delmont-imaging.com