




*imaging all the women\**

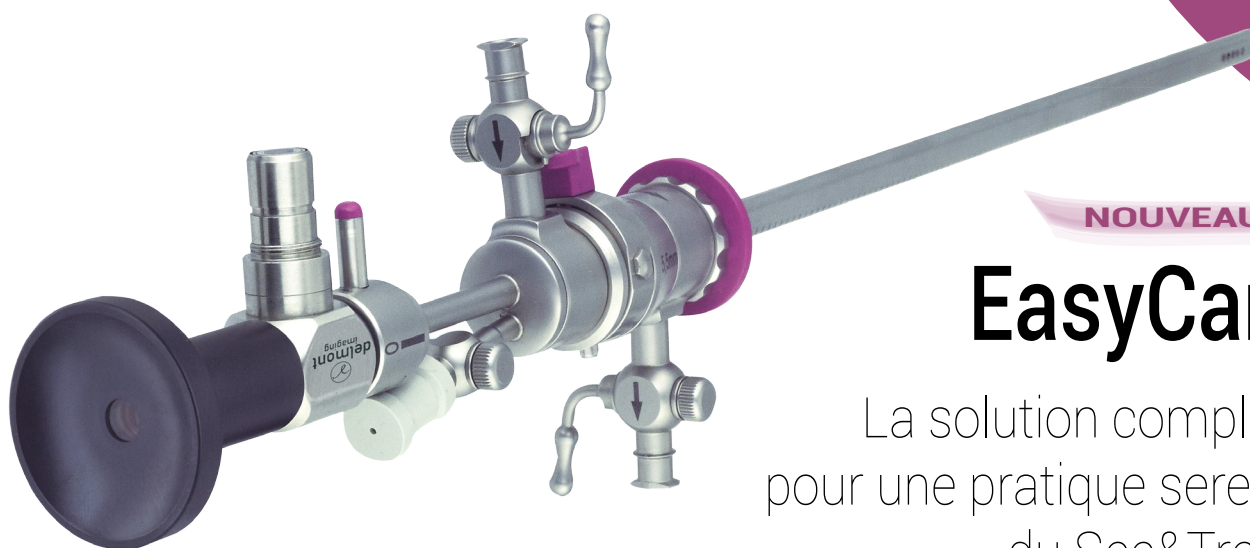

**NOUVEAU**

# EasyCare


La solution complète  
pour une pratique sereine  
du See&Treat\*\*

*D'après le Pr. H. Fernandez*



« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystéroscopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution **EasyCare** avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. De plus, chaque instrument est gradué pour faciliter vos repères chirurgicaux. »


**Pr. Hervé Fernandez,**  
Chef de service de Gynécologie-Obstétrique  
à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre

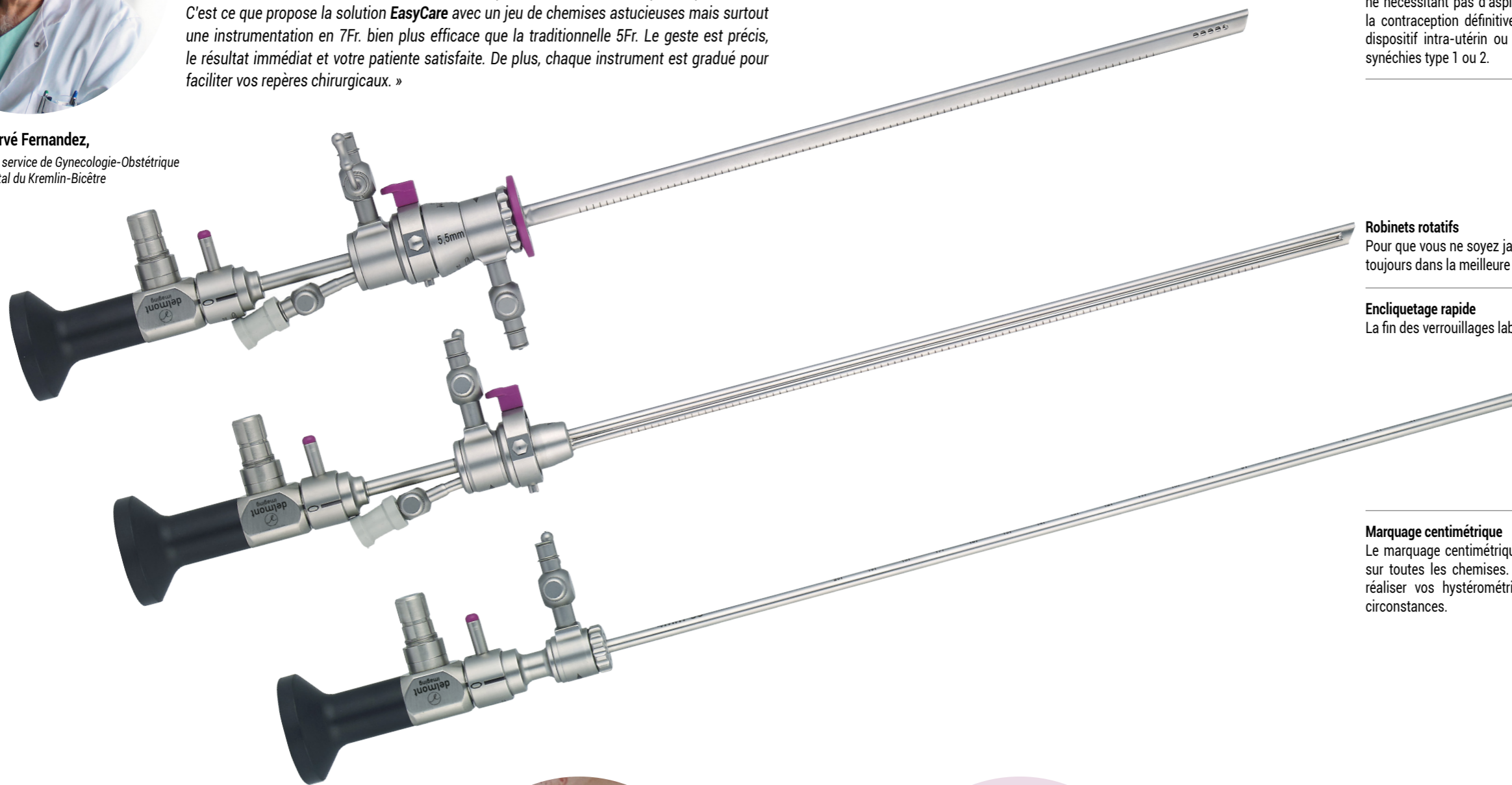

**Chemise interne atraumatique de 4,9mm**  
Avec son extrémité totalement émoussée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme la contraception définitive, le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.




**Robinets rotatifs**  
Pour que vous ne soyez jamais gênés et toujours dans la meilleure position.

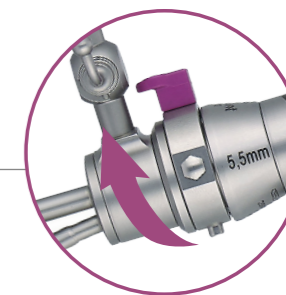



**Encliquetage rapide**  
La fin des verrouillages laborieux !

**Marquage centimétrique**  
Le marquage centimétrique est présent sur toutes les chemises. Vous pourrez réaliser vos hystérométries en toutes circonstances.

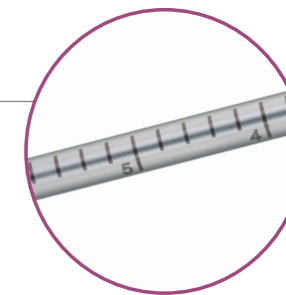

## Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez « net partout » ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

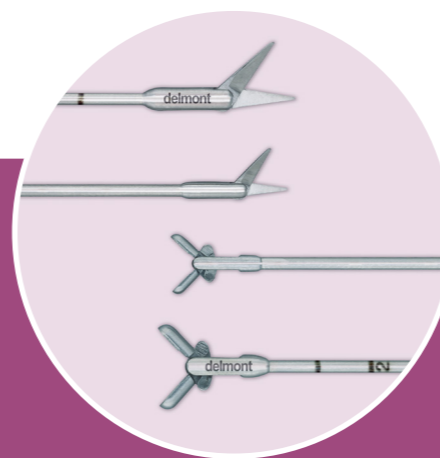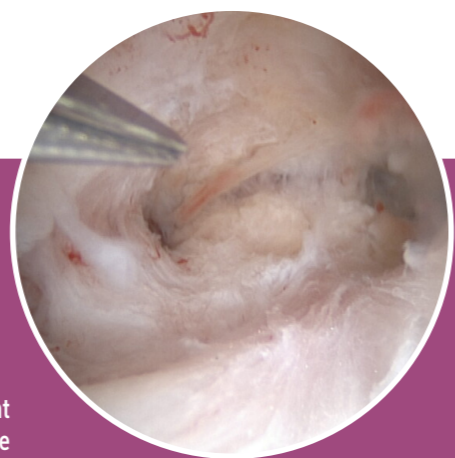

## L'efficacité du 7Fr. ! !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues<sup>2</sup> que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur<sup>3</sup> à son homologue en 5Fr. ! L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr. Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

<sup>1</sup>: 1mm = 3Fr.  
<sup>2</sup>: 5,7mm vs 3,8mm  
<sup>3</sup>: 8,23mm<sup>3</sup> vs 3,2mm<sup>3</sup>

# Le set **EasyCare** complet - Réf. D400 100 017 comprend les éléments suivants :

## Hystéroscope HD. 2,9mm. 30°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 000



## Chemise opératoire externe graduée. 5,5mm

Robinet d'aspiration rotatif. Encliquetage rapide. L:216mm

Réf. D300 110 000



## Chemise opératoire interne graduée. 4,9mm

Canal opératoire 7Fr. Robinet d'irrigation rotatif. L:230mm

Réf. D300 110 001



## Chemise diagnostique graduée. 4mm

Robinet d'irrigation rotatif. L:270mm

Réf. D300 110 002



## Paire de ciseaux graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage

L:340mm. 1 mors mobile

Réf. D300 120 008



## Pince à biopsies graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage

L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 010



## Pince à préhensions graduée (alligator). 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage

L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 009



## Pince à extractions graduée (DIU). 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage

L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 011



## Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



## Accessoires optionnels :

### Electrope bipolaire flexible 5 Fr. de type bouton

Réf. D300 140 010



### Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type pointe

Réf. D300 140 011



### Panier de stérilisation

Autoclavable. 485x255x50mm. Fourni avec tapis en silicone

Réf. D200 160 500

