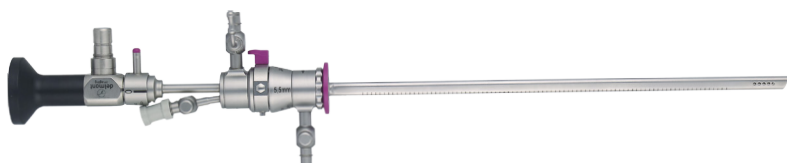


Fiche technique EasyCare



Instruments avec canal de nettoyage

Ref : D400 100 017

Code GTIN : 3701217802896

Le set complet EasyCare comporte :

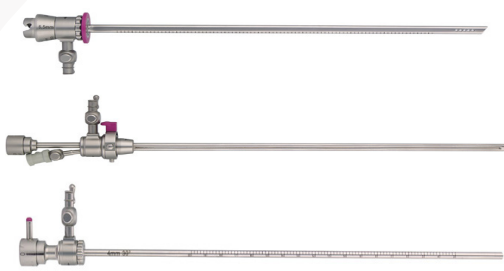
- 1 hystéroscope HD
- 1 chemise opératoire externe graduée
- 1 chemise opératoire interne graduée
- 1 chemise diagnostique graduée
- 4 instruments
- 1 câble de lumière

Instruments sans canal de nettoyage

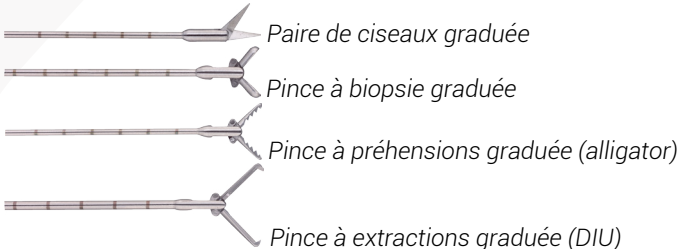
Ref : D400 100 000

Code GTIN : 3701217802612

Hystéroscope	
Réglementation	
Descriptif	Hystéroscope HD 2.9 mm 30°
Utilisation prévue	Endoscopie gynécologique uniquement
Photo	
Marquage CE	Oui (CE 1304)
Classe du dispositif	Ila
Référence article	D300 100 000
Code GMDN	36628
Code GTIN	3701217800168
Conforme directive Européenne	93/42/CEE
Conforme normes internationales	EN ISO 15223-1:2013, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 17665-1:2006, EN 1041:2008, EN ISO 10993-10:2013, EN 62366:2008, EN ISO 10993-12:2012, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 17664:2004, ISO 8600-4:2014, ISO 8600-5:2005, ISO 8600-1:2015, ISO 8600-6:2005, ISO 8600-3:1997/AMD 1:2003, ISO 8600-7/2012
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Données techniques	
Résolution	HD
Diamètre de l'hystéroscope	2.9 mm
Angulation	30°
Type de technologie	Lentilles
Longueur utile	300 mm
Nettoyage et désinfection	Désinfection de l'endoscope selon les indications du fabricant de la solution utilisée, rinçage et séchage. <i>Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails</i>
Autoclavable	Oui
Raccordement pour câble de lumière	Type ACMI
Adaptateur pour câble de lumière	Type Wolf, Storz, Olympus
Environnement	
Température de transport de stockage	-10°C / +40°C
Humidité de transport et de stockage	10 à 90%
Système d'hystéroscopie	
Réglementation	
Descriptif	Chemises d'hystéroscopie diagnostique et interventionnelle
Utilisation prévue	Hystéroscopie
Photos	 <i>Chemise opératoire externe</i> <i>Chemise opératoire interne</i> <i>Chemise diagnostique</i>
Marquage CE	Oui (CE 1304)
Classe du dispositif	Ila
Code GMDN	37086
Conforme directive Européenne	93/42/CEE

Conforme normes internationales	EN ISO 15223-1:2013, EN ISO 10993-1:2009, EN 1041:2008, EN ISO 10993-10:2013, EN 62366:2008, EN ISO 10993-12:2012, EN ISO 17664:2004, ISO 7153-1:2016, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 17665-1:2006, EN ISO 10993-5:2009
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène
Chemise opératoire externe graduée	
Référence article	D300 110 000
Code GTIN	3701217800618
Diamètre de la chemise externe	5.5 mm
Longueur utile	216 mm
Robinet d'aspiration rotatif	Oui
Encliquetage rapide	Oui
Graduation	Oui
Chemise externe atraumatique	Oui
Nettoyage et désinfection	Bien dissocier les chemises internes et externes préalablement. Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Chemise opératoire interne graduée	
Référence article	D300 110 001
Code GTIN	3701217800625
Diamètre de la chemise interne	4.9 mm
Longueur utile	230 mm
Diamètre du canal opératoire	7Fr.
Robinet d'irrigation rotatif	Oui
Longueur du canal d'insertion du canal opératoire	Court
Graduation	Oui
Chemise interne atraumatique	Oui
Chemises internes et externes dissociables	Oui

Nettoyage et désinfection	Bien dissocier les chemises internes et externes préalablement. Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. <i>Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails</i>
Autoclavable	Oui. <i>Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails</i>
Chemise diagnostique graduée	
Référence article	D300 110 002
Code GTIN	3701217800632
Diamètre de la chemise diagnostique	4 mm
Longueur utile	270 mm
Robinet d'irrigation rotatif	Oui
Graduation	Oui
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. <i>Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails</i>
Autoclavable	Oui. <i>Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails</i>
Instruments	
Réglementation	
Descriptif	Instruments chirurgicaux réutilisables : ciseaux et pinces
Utilisation prévue	Chirurgie endoscopique
Photos	 Paire de ciseaux graduée Pince à biopsie graduée Pince à préhensions graduée (alligator) Pince à extractions graduée (DIU)
Marquage CE	Oui
Classe du dispositif	I
Conforme directive Européenne	93/42/CEE
Conforme normes internationales	DIN EN ISO 15223-1, DIN EN 1041
Produits toxiques ou allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Paire de ciseaux graduée		
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Référence article	D300 120 008	D300 120 000
Code GTIN	3701217802858	3701217801196
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	1	
Graduation	Oui	
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Pince à biopsie graduée		
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Référence article	D300 120 010	D300 120 002
Code GTIN	3701217802872	3701217801219
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Pince à préhensions graduée		
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Référence article	D300 120 009	D300 120 001
Code GTIN	3701217802865	3701217801202
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	

Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Pince à extractions graduée		
Luer-Lock pour canal de nettoyage	Oui	Non
Référence article	D300 120 011	D300 120 003
Code GTIN	3701217802889	3701217801226
Souplesse	Semi-rigide	
Diamètre	7Fr.	
Longueur utile	340 mm	
Mors mobiles	2	
Graduation	Oui	
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection thermique en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails	
Câble de lumière		
Réglementation		
Descriptif	Câble de lumière	
Utilisation prévue	Endoscopie	
Photo		
Marquage CE	Oui	
Classe du dispositif	I	
Référence article	D200 150 500	
Code GTIN	3701217800090	
Conforme directive Européenne	93/42/CEE	

Conforme normes internationales	IEC 60601-1:2005, IEC 60601-2-18:2009, DIN EN ISO 10993-1:2010-04, DIN EN ISO 10993-5:2009-10, DIN EN ISO 10993-12:2009-08, EN ISO 17664:2004
Données techniques	
Diamètre	3.5 mm
Longueur	2.3 m
Couleur	Gris
Nettoyage et désinfection	Pré-nettoyage puis nettoyage et désinfection en machine selon les indications du fabricant des solutions et machines utilisées, nettoyage et désinfection manuels possibles mais peu recommandés. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Embouts fournis	Storz