




*imaging all the women**

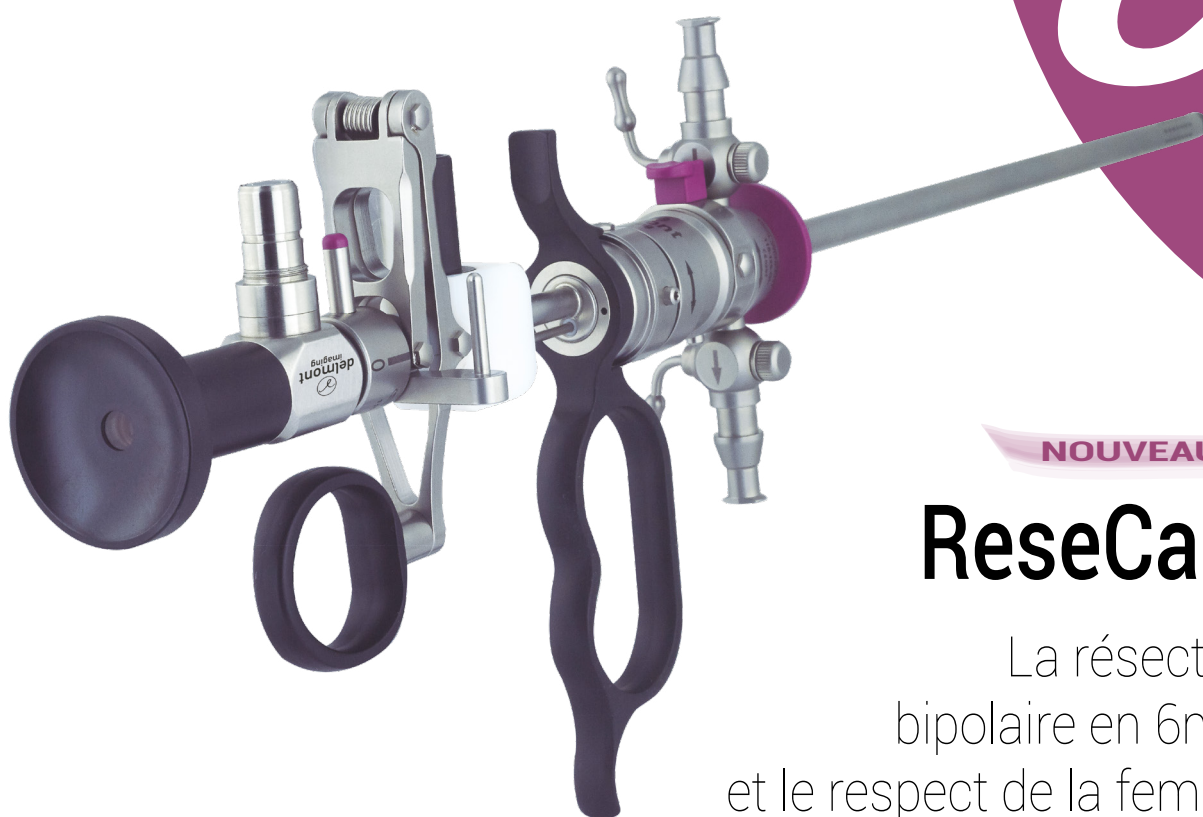

NOUVEAU

ReseCare

La résection
bipolaire en 6mm
et le respect de la femme




Un résecteur de 18,5Fr. seulement

Petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente.


Avec **ReseCare**, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.

ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

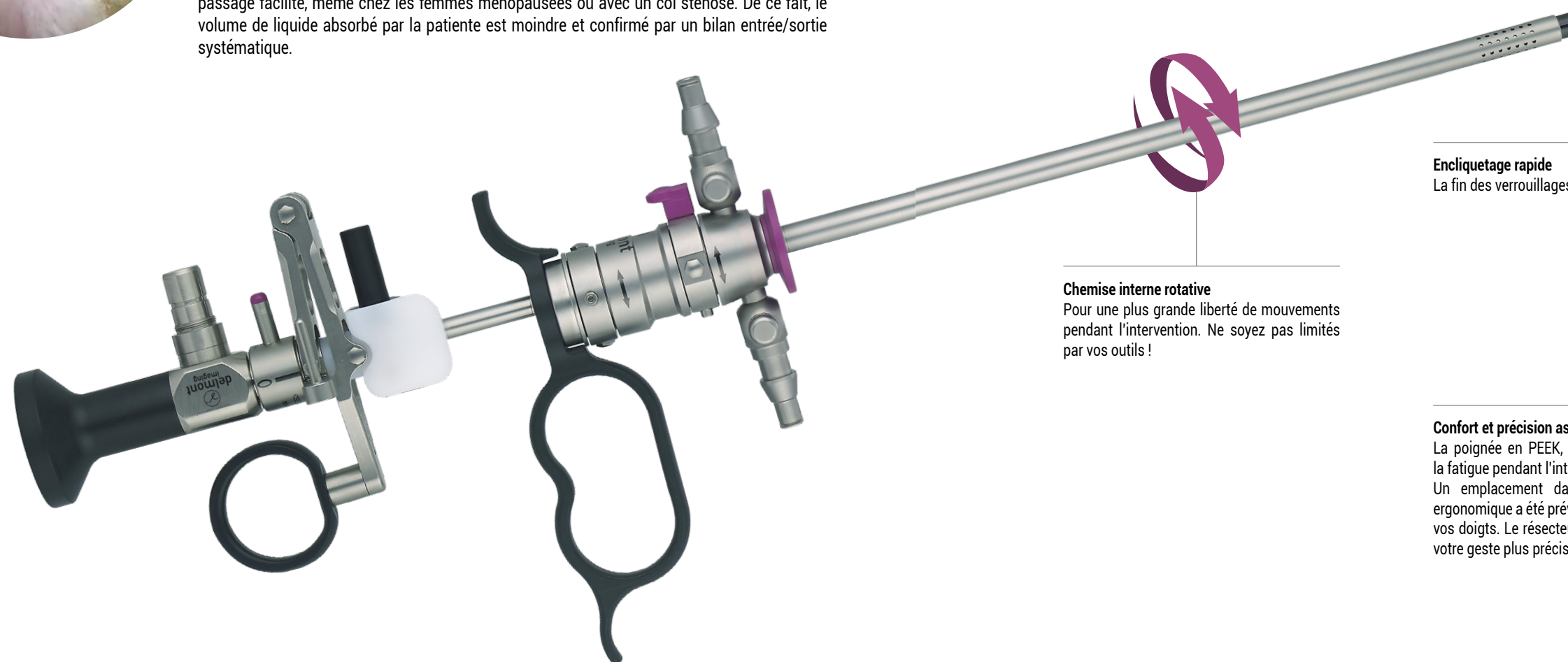

La qualité dans les moindres détails

Une bonne image passe aussi par un couple «aspiration-irrigation» maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.

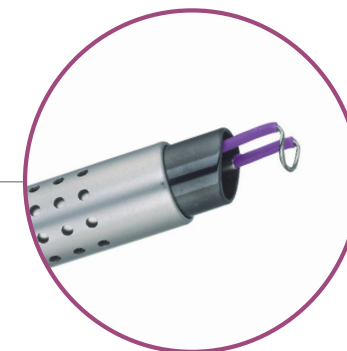

Encliquetage rapide

La fin des verrouillages laborieux !



Chemise interne rotative

Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !



Confort et précision assurés

La poignée en PEEK, ultra-légère, évite la fatigue pendant l'intervention.



Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.

La résection bipolaire

Les avantages de cette technologie, désormais largement répandue, reposent sur deux éléments, tous deux liés à la sécurité de vos patientes.

Tout d'abord, le courant ne traverse plus la patiente pour revenir au générateur, mais revient directement par le résecteur lui-même, réduisant les risques de brûlures liés aux courants de diffusion et de synéchies par destruction de l'endomètre adjacent.

Mais aussi et surtout, un résecteur monopolaire se doit d'utiliser du glycolle dont l'absorption par la patiente est source de troubles ioniques pouvant aller jusqu'au décès. Par opposition, un résecteur bipolaire utilise en lieu et place du glycolle, du sérum physiologique, nullement toxique, et de surcroît moins onéreux. **ReseCare** connecté à un générateur bipolaire vous offre ce surplus de sérénité. Il reste néanmoins compatible et fonctionne parfaitement avec tous les générateurs monopolaires.

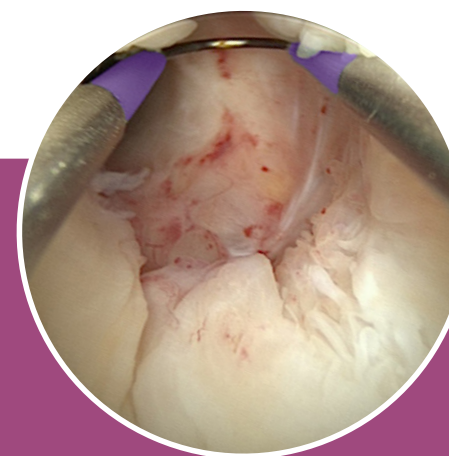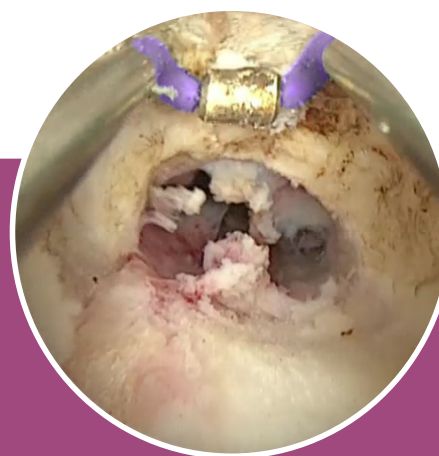

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

Références et caractéristiques de ReseCare :

Hystéroscope HD. 2,9mm. 12°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 004



Chemise externe 18,5Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 000



Chemise interne 17,5Fr.

Rotative

Réf. D300 130 001



Élément de travail à action passive

Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires


Réf. D300 130 002



Élément de travail à action active

Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires

Réf. D300 130 009

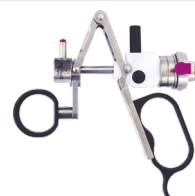

Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



NOUVEAU

Electrodes :

Description	Référence	
	Stérile, à usage unique (Livrées par boîte de 10)	Réutilisable
 Electrode coupante 30°	D300 140 067	D300 140 000
 Electrode coupante droite	D300 140 068	D300 140 001
 Electrode couteau	D300 140 069	D300 140 002
 Electrode rouleau	D300 140 070	D300 140 003

Accessoires :

Obturbateur

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 003



Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Réf. D200 160 003



NOUVEAU

Panier de stérilisation ReseCare

Autoclavable. 480x240x70mm. Avec support en silicone personnalisés

Réf. D200 160 504



Cordon de résection bipolaire. Erbe

VIO300D

Réf. D200 190 001

Cordon de résection bipolaire. Covidien

ForceTriad

Réf. D200 190 000