



*imaging all the women**



NeoCare

Quand la polyvalence rencontre
la performance






Un set complet d'hystérocopie opératoire

Pour traiter efficacement la majorité des pathologies utérines

NeoCare a été pensé afin de vous permettre une utilisation régulière d'instruments 3mm sans énergie, et ainsi préserver l'endomètre de vos patientes. Même dans le cadre de pathologies majeures tels que les fibromes calcifiés de grandes tailles, la performance et la précision des instruments rigides de 3mm vous permettent une prise en charge efficace, facilitant la chirurgie en un temps.

Électrodes bipolaires et résecteur 26Fr. viennent compléter le set de base et vous permettent ainsi d'aborder sereinement toutes les pathologies utérines intra-cavitaires.

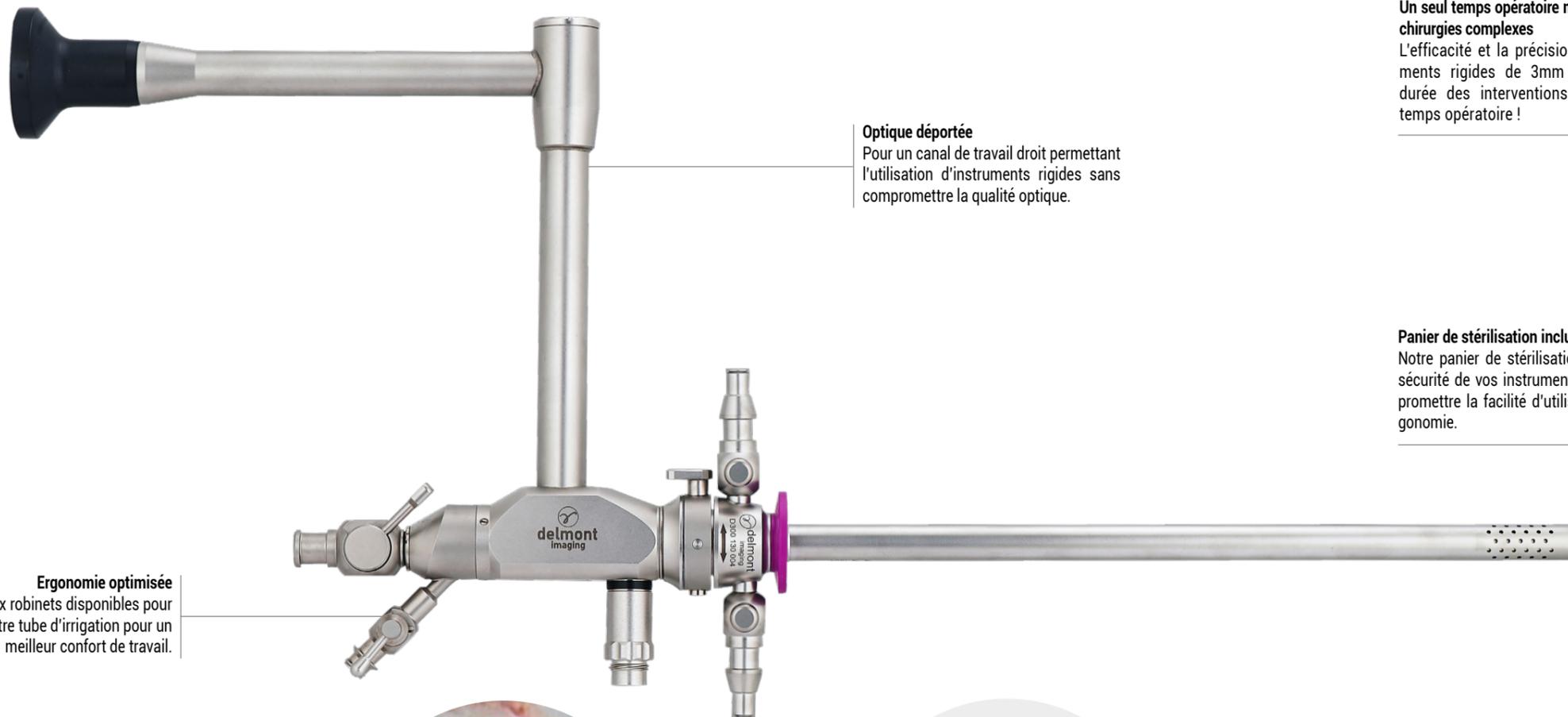


Ergonomie optimisée
Deux robinets disponibles pour votre tube d'irrigation pour un meilleur confort de travail.

Optique déportée
Pour un canal de travail droit permettant l'utilisation d'instruments rigides sans compromettre la qualité optique.


La sécurité du bipolaire

Trois modèles d'électrodes bipolaires sont fournis pour pouvoir traiter toutes les zones de l'utérus.

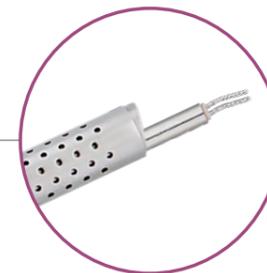

Un seul temps opératoire même pour les chirurgies complexes

L'efficacité et la précision des instruments rigides de 3mm réduisent la durée des interventions. Gagnez en temps opératoire !

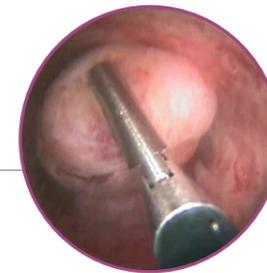

Panier de stérilisation inclus

Notre panier de stérilisation garantit la sécurité de vos instruments sans compromettre la facilité d'utilisation et l'ergonomie.



Un condensé de prouesses technologiques

L'hystérocopie opératoire NeoCare a été conçue afin de vous garantir les meilleures performances et une ergonomie à toutes épreuves.

L'association de lentilles HD avec un éclairage généreux et homogène vous garantissent une image lumineuse et pleinement résolue. De plus, le large canal de travail (4,5mm) maintient une irrigation très performante même lors de l'utilisation d'instruments 3mm.

Enfin, notre canal de travail est muni d'un système double valve breveté qui assure une étanchéité totale.



NeoCare+ pour encore plus de polyvalence !

La chemise externe de NeoCare étant identique à celle de notre résecteur MaxiCare, vous pouvez combiner leurs utilisations pendant la même chirurgie. La chemise reste positionnée dans l'utérus pendant le changement d'instrument, évitant toutes lacérations cervicales.

Le set NeoCare+ combine NeoCare et MaxiCare. La prise en charge de vos patientes n'aura jamais été si facile.



Le set **NeoCare** complet - Réf D400 100 032 comprend les éléments suivants :

Hystéroscope opératoire NeoCare 8mm. 12°

Oculaire déporté à 90°. Autoclavable.
Canal opératoire de 12Fr.

Réf. D300 100 051



Chemise externe 26Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 004



Poignée plastique pour instruments 3mm

Avec module de rotation. Sans crémaillère
4 unités sont incluses dans le set.

Réf. D300 120 504



Micro-ciseaux droits 3mm

1 mors mobile. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 509



Ciseaux courbés 3mm. Type Metzenbaum

2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 507



Pince à préhension universelle 3mm

Mors dentés et ondulés.

2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 510



Pince à préhension et extraction 3mm. 2x3 dents

1 mors mobile. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 515



Electrode crochet en L. 3mm

Longueur utile : 360mm

Réf. D300 120 772



Electrode droite. 3mm

Longueur utile : 360mm

Réf. D300 120 773



Electrode crochet en V. 3mm

Longueur utile : 360mm

Réf. D300 120 774



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Panier de stérilisation NeoCare

Comprend deux plateaux associables et un couvercle
Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 515



Le set **NeoCare+** - Référence D400 100 033 inclut les produits du set **NeoCare** et du set **MaxiCare**.