

Le set **EasyCare** complet - Réf. D400 100 017
comprend les éléments suivants :

Hystéroscope HD. 2,9mm. 30°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 000



Chemise opératoire externe graduée. 5,5mm

Robinet d'aspiration rotatif. Encliquetage rapide. L:216mm

Réf. D300 110 000



Chemise opératoire interne graduée. 4,9mm

Canal opératoire 7Fr. Robinet d'irrigation rotatif. L:230mm

Réf. D300 110 001



Chemise diagnostique graduée. 4mm

Robinet d'irrigation rotatif. L:270mm

Réf. D300 110 002



Paire de ciseaux graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage
L:340mm. 1 mors mobile

Réf. D300 120 008



Pince à biopsies graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage
L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 010



Pince à préhensions graduée (alligator). 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage
L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 009



Pince à extractions graduée (DIU). 7Fr.

Semi-rigide. Avec canal de nettoyage
L:340mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 011



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Accessoires optionnels :

Electrope bipolaire flexible 5 Fr. de type bouton

Réf. D300 140 010



Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type pointe


Réf. D300 140 011



Panier de stérilisation EasyCare

Autoclavable. 480x240x70mm. Avec supports dédiés en silicone

Réf. D200 160 503

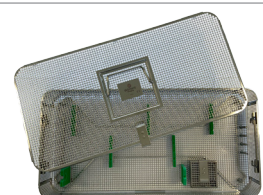

Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com


* Imagez toutes les femmes
** Voir et traiter

Delmont Imaging est le fabricant de l'optique et du système d'hystéroscope, dispositifs médicaux de Classe IIa portant le marquage CE 1304. Organisme notifié SIO, présentés dans ce document. Delmont Imaging est le fabricant des instruments et du câble de lumière, dispositifs de Classe I.

Document non contractuel - Réf. D900 700 002 F - 10/2019 - Copyright© 2016 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.



imaging all the women*

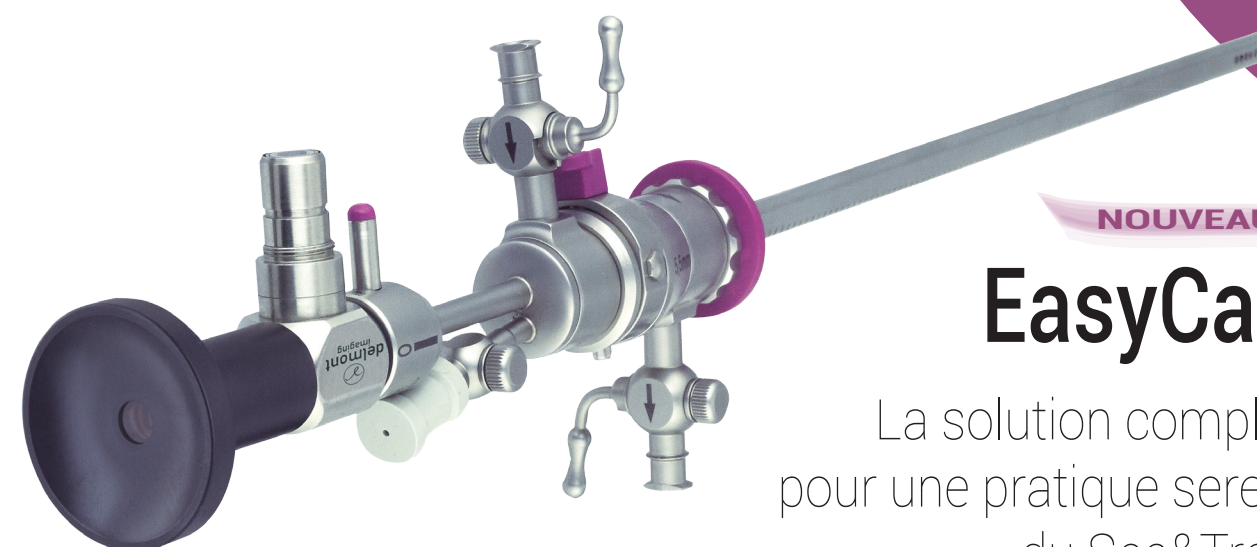

NOUVEAU

EasyCare

La solution complète
pour une pratique sereine
du See&Treat**


D'après le Pr. H. Fernandez





Pr. Hervé Fernandez,
Chef de service de Gynécologie-Obstétrique
à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre

« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystéroscopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution **EasyCare** avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. De plus, chaque instrument est gradué pour faciliter vos repères chirurgicaux. »

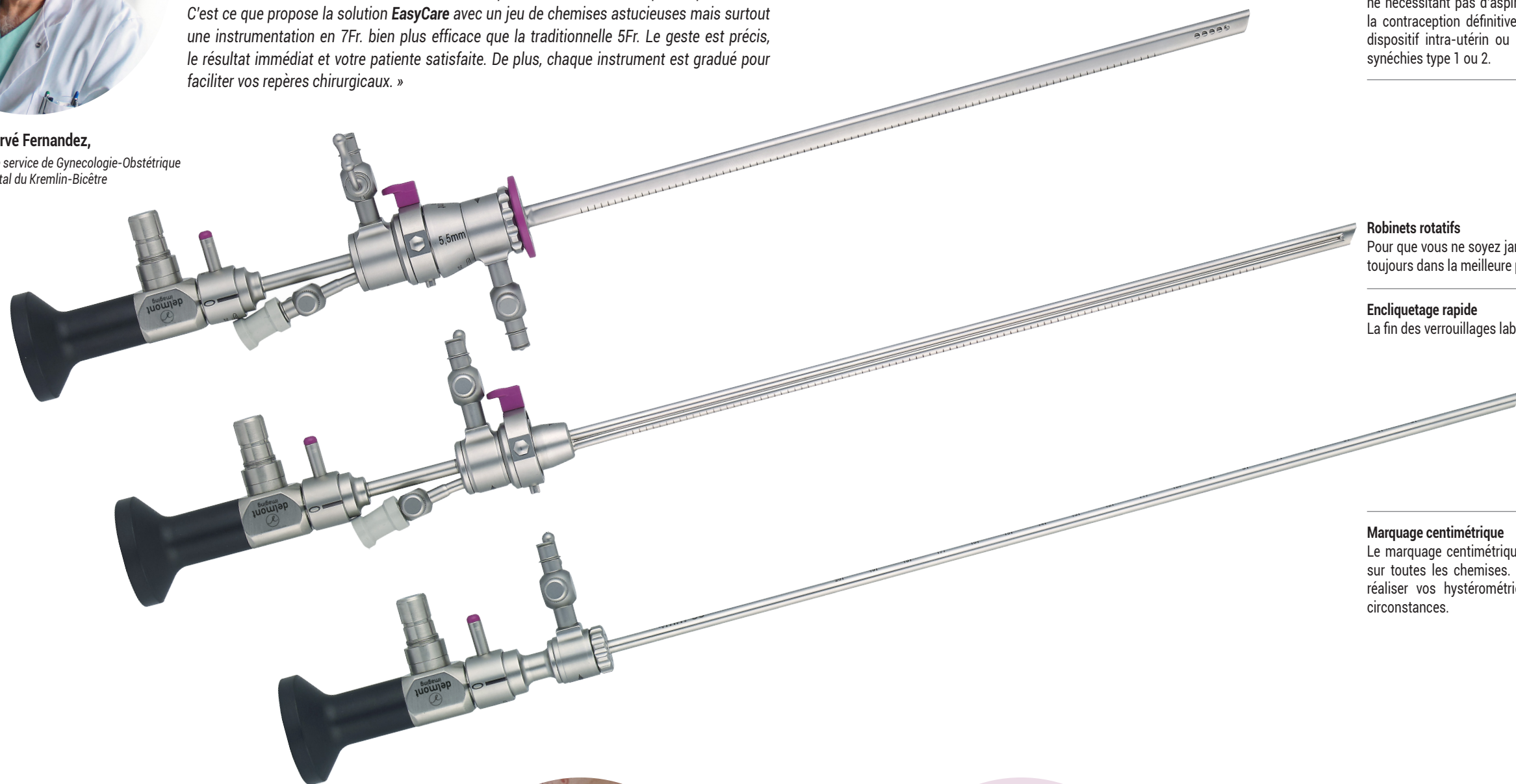


Chemise interne atraumatique de 4,9mm

Avec son extrémité totalement émoussée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme la contraception définitive, le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.



Robinetts rotatifs

Pour que vous ne soyez jamais gênés et toujours dans la meilleure position.

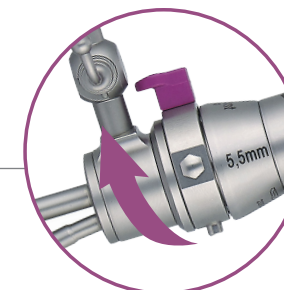


Encliquetage rapide

La fin des verrouillages laborieux !



Marquage centimétrique

Le marquage centimétrique est présent sur toutes les chemises. Vous pourrez réaliser vos hystérométries en toutes circonstances.

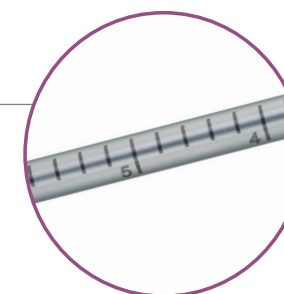

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez « net partout » ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

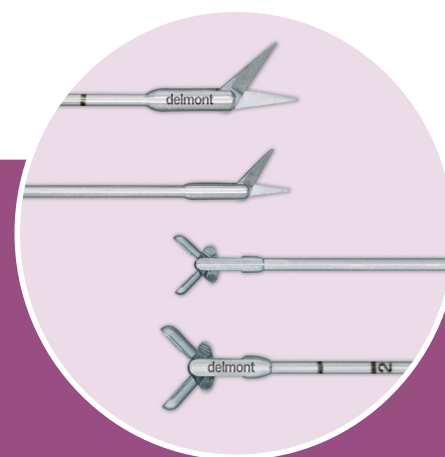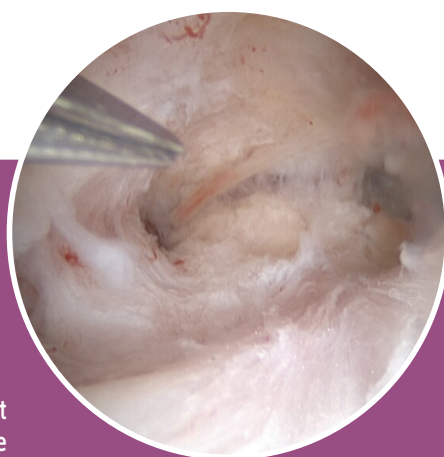

L'efficacité du 7Fr.¹ !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues² que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur³ à son homologue en 5Fr. ! L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr. Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

¹ : 1mm = 3Fr.

² : 5,7mm vs 3,8mm

³ : 8,23mm³ vs 3,2mm³