

Le manipulateur utérin selon


Mangeshikar



PRÉSENTATION DE MANGESHIKAR

On manipulateur utérin réutilisable

Mors Pozzi pour fixer l'utérus

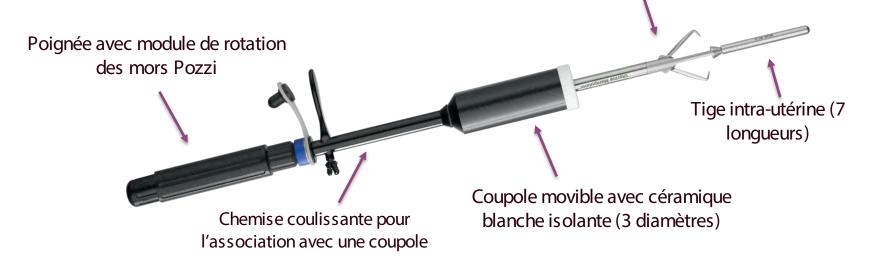

Chemise externe avec vis de fixation

Chemise interne





Mangeshikar présente de nombreux atouts :


- Assemblage intuitif en 6 étapes → facile d'utilisation
- Fixation efficace de l'utérus
- 3 diamètres de coupole et 7 longueurs de tige intra-utérine → personnalisable → maniabilité et précision
- Coupole amovible re-plaçable dans le vagin après retrait de l'utérus
 Etanchéité
- Coupole avec céramique blanche résistante pouvant servir de guide

MANGESHIKAR FACE A LA CONCURRENCE

RICHARD WOLF

Richard Wolf propose SecuFix:




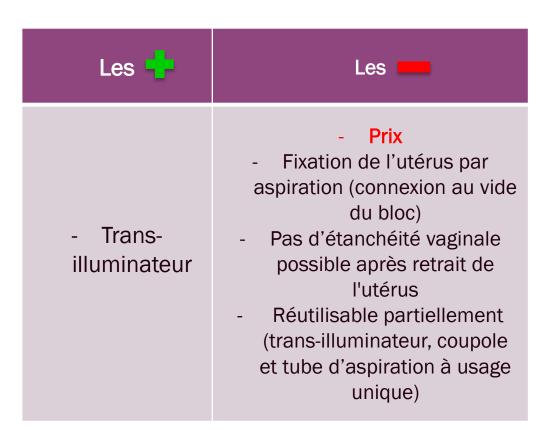



Storz propose Keckstein:



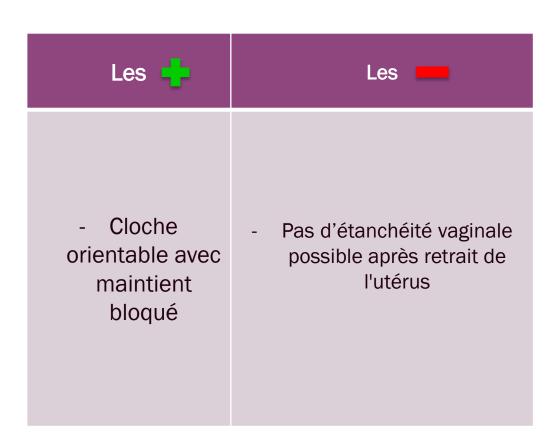



Storz propose Clermont-Ferrand:









Storz propose Hohl:



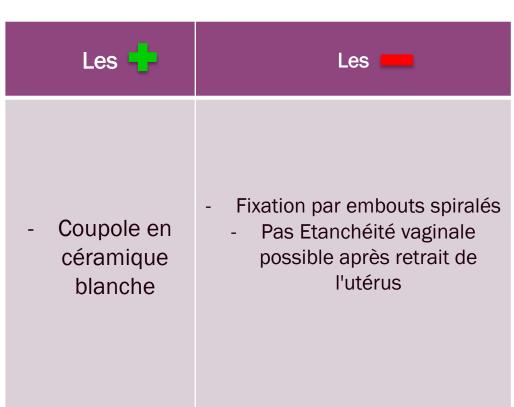




Storz propose Tintara:

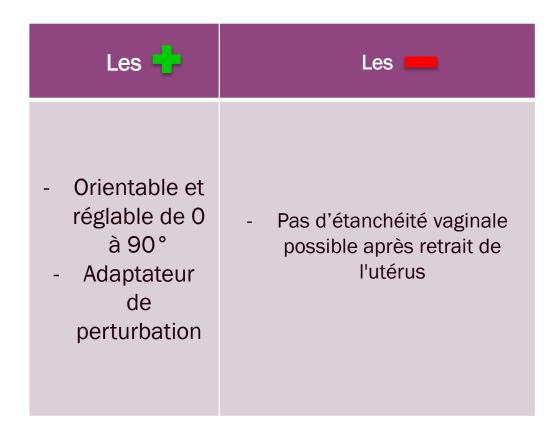



Storz propose Donnez:




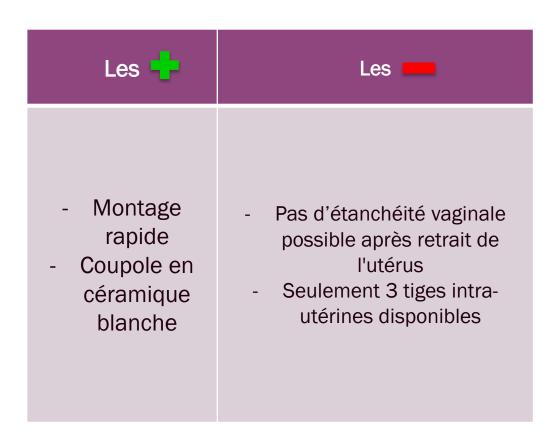

COOPER SURGICAL

Cooper surgical propose le Rumi II, un manipulateur **semi-réutilisable** (seul l'embout est jetable) :




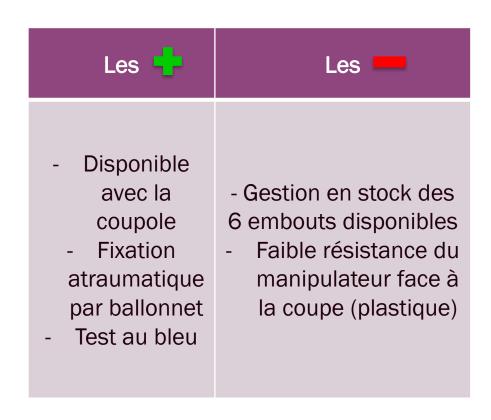

COOPER SURGICAL

Cooper surgical propose le Advincula Arch, un manipulateur **semi-réutilisable** (seul l'embout est jetable) :




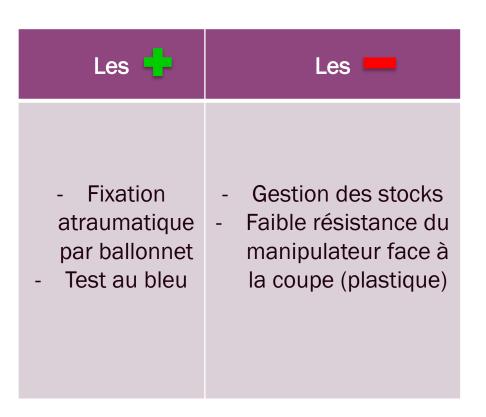

THT BIO-SCIENCE

THT bio-science propose Hysteroswing:



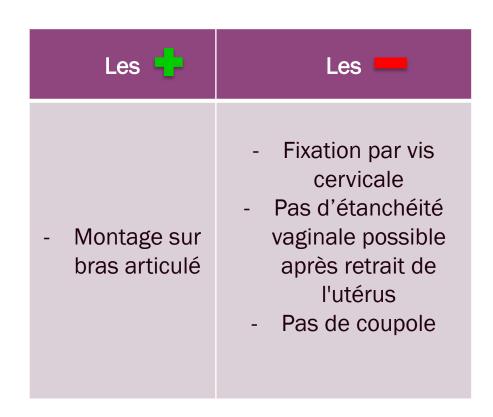



Manipulateurs utérins stériles à usage unique

A savoir également la présence sur le marché de manipulateurs utérins à usage unique. Ils ne nécessitent pas ou très peu d'assemblage et sont plus facile d'utilisation. Cependant, la gestion des stocks est rendue plus difficile et ces manipulateurs utérins présentent des coupoles en plastique, très peu résistantes à la coupe.

Les principaux fournisseurs sont :

- Vectec
- Clinical Innovations
- Cooper surgical
- Conmed



Canule de Spackman

A savoir, les canules de Spackman peuvent être utilisées pour la manipulation de l'utérus. Ce sont des manipulateurs utérins « light ».

Il n'y a pas de fixation de l'utérus donc sa manipulation est moins aisée : une aide opératoire est indispensable ! Elles permettent surtout l'injection de liquide dans l'utérus.



Il y a de très nombreux fournisseurs!!

Et les **hystéromètres** peuvent également être utilisés pour manipuler l'utérus, avec des compresses et des pinces de Pozzi pour maintenir le tout.



COMMENT UTILISER MANGESHIKAR

?

Les indications

- Utilisation en cas d'hystérectomie totale par laparos copie pour mobiliser et visualiser l'utérus ainsi

- Protection de la vessie, l'uretère et le rectum pendant la résection électrochirurgicale de l'utérus





Instructions d'utilisation

- Utiliser l'hystéromètre dilatateur pour dilater le col de l'utérus et mesurer la profondeur de l'utérus.
- **Pour le montage** : Choisir l'insert en fonction de la longueur de l'utérus et choisir le diamètre de la coupole en fonction du diamètre du col.
- Insérer le manipulateur et utiliser la roulette pour resserrer le mors et attacher le col
- Glisser la coupole
- Serrer pour verrouiller le col utérin

Fonctionnement de la pince

• Ouverture de la pince : appuyer sur la partie arrière de la poignée pour la sortir et tourner dans le sens horaire.

 Fermeture de la pince : tourner dans le sens antihoraire et appuyer à nouveau sur la partie arrière de la poignée pour la rentrer.