

Références et caractéristiques de nos Colposcopes :

Colposcope bras pivotant

5 grossissements : 2,83x ; 4,25x ; 7,08x ; 11,33x ; 17,71x

Poids : 37kg

Dimensions : 335 - 1 295mm

Réf. D100 300 000

Spécifications :

Lumière : LED 100 000 lux

Lentilles apochromatiques

Oculaire : 12,5x

Objectifs fixes disponibles : 175 ; 200 ; 250 ; 300 ; 400mm

Plage de netteté sur objectif fixe : 11mm

Binoculaire à 45°

Filtre vert



Colposcope par dessus l'épaule

5 grossissements : 2,83x ; 4,25x ; 7,08x ; 11,33x ; 17,71x

Poids : 37kg

Dimensions : 635 - 1 295mm

Réf. D100 300 001

Spécifications : Voir Colposcope bras pivotant



Colposcope support droit

3 grossissements : 4,25x ; 7,08x ; 11,33x

Poids : 18,14kg

Dimensions : 1 016 - 1 193mm

Réf. D100 300 002

Spécifications : Voir Colposcope bras pivotant



Accessoires optionnels :

Séparateur de faisceau double

50/50 & 20/80

Réf. D100 300 003



Variofocus - Objectif à focale variable

F=200 à 350mm

Réf. D100 300 004



Adaptateur pour caméra vidéo

Réf. D100 300 005



Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope

Couleur violette

Réf. D100 300 006



Dispositif Médical de Classe I selon la directive Européenne 93/42/EEC. Fabriqué par la société Seiler Instrument & Manufacturing CO., Inc., 3433 Tree Court Industrial Boulevard, St. Louis, Missouri, 63122 ETATS-UNIS ayant pour mandataire Européen : Atlantico systems Ltd, 34 Oldfield, Kingston, Galway H91 D8CX, IRLANDE

Document non contractuel - Réf. D900 700 111 A FR - 2020-07 - Copyright© 2016 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.

* Imagez toutes les femmes



imaging all the women*




Nos colposcopes

Performances et ergonomie


delmont
imaging


delmont
imaging

Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

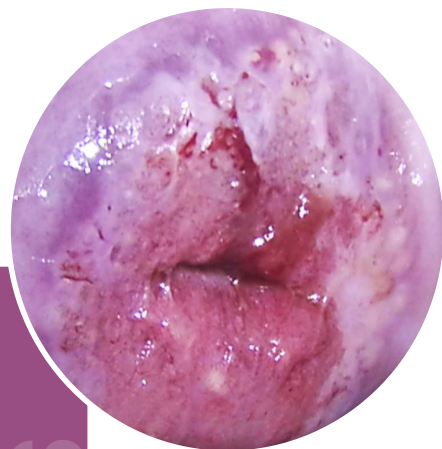

Une gamme complète de colposcopes

Qualité d'image exceptionnelle et performances hors normes

Les composants optiques de nos colposcopes sont fabriqués en Allemagne. Ils vous garantissent une qualité d'image irréprochable et des examens d'une très grande précision. Nous vous proposerons LA solution adaptée à votre pratique parmi un large choix de modèles et d'accessoires. De plus, le compte rendu intuitif généré par notre application *imagyn™* vous permettra de renforcer votre communication patiente.



Un système optique au service de la netteté et du confort de travail

Avec notre objectif Variofocus, vous pourrez rester net sur une distance de travail de 200 à 350mm. Plus besoin d'avancer ou de reculer le colposcope au cours de l'examen pour une bonne visualisation du col et du vagin. La distance inter-pupillaire et les dioptries sont ajustables sur tous nos modèles pour une parfaite adaptation à votre vue. Enfin, les nombreux niveaux de grossissements disponibles vous permettront de toujours obtenir le champ de vision souhaité.




Une ergonomie adaptée à votre besoin

Que vous recherchiez un encombrement minimum, un espace de travail sans obstacle ou le confort d'un bras pivotant, toutes ces configurations sont disponibles dans notre gamme. La maniabilité et l'équilibre de nos bras permettent de les positionner avec un seul doigt !




De la colposcopie à l'hystéroscopie en un seul geste

Notre colonne d'imagerie *iCare+* est le complément idéal permettant une connexion aisée de la caméra au colposcope. Grâce à notre application *imagyn™*, regroupez tous vos comptes rendus d'examens dans une seule base de données.

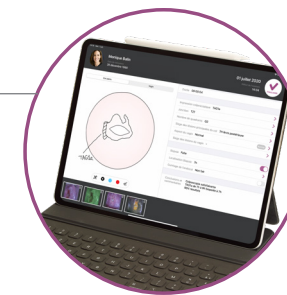

Divers accessoires disponibles

Que vous souhaitiez connecter un appareil photo, visualiser l'image sur un moniteur ou encore utiliser un laser, nous avons une solution pour vous !

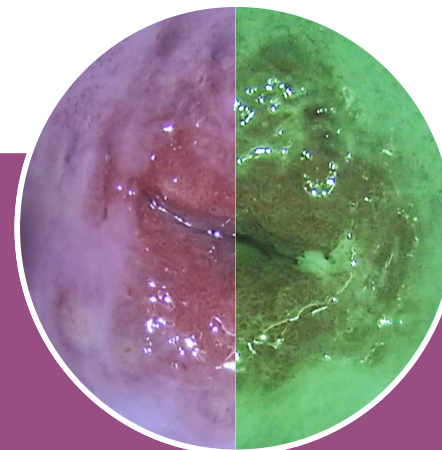

Profitez d'une image ultra-définie !

Nos lentilles apochromatiques corrigent les aberrations chromatiques et sphériques, et permettent ainsi d'obtenir une image fidèle avec un rendu optimal des couleurs. Le filtre vert de nos colposcopes est essentiel pour augmenter le contraste entre la muqueuse et les vaisseaux sanguins et ainsi faciliter l'identification des rugosités, des granulations et des régions hyper-vascularisées.