

| Société                                |  |  |                  |                                          |                      |                  |  |  |  |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nom                                    | Mangeshikar                                                                       | Keckstein                                                                          | Clermont-ferrand | Hohl                                     | Tintara              | Donnez           | SecuFix                                                                             | RUMI II                                                                             | Advincula Arch                                                                      | Hystero-swing |
| Réutilisable                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                  |                                          |                      |                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |                                                                                     | ✓             |
| Parties à usages uniques               | /                                                                                 | /                                                                                  | /                | /                                        | /                    | /                | Coupole transilluminateur et tubes d'aspiration                                     | Coupoles et tiges intra-utérines                                                    |                                                                                     | /             |
| Nombre étapes d'assemblage             | 6                                                                                 | 7                                                                                  | 7                | 5                                        | 4                    | 4                | 5                                                                                   | 3                                                                                   | 7                                                                                   |               |
| Coupoles disponibles                   | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 3 Lames          | 4                                        | Pas de coupole       | 3                | 1 «Polyvalente»                                                                     | 4                                                                                   | 3                                                                                   |               |
| Tiges intra-utérine disponibles        | 7                                                                                 | 3 inserts fileté<br>6 inserts de travail                                           | 7                | 3 inserts fileté<br>9 inserts de travail | 7 inserts de travail | 3                | 1 (longueur modifiable)                                                             | 6                                                                                   | 5                                                                                   |               |
| Système de fixation de l'utérus        | Mors Pozzi                                                                        | Vissage avec inserts filetés                                                       | Vis cervicale    | Trois embouts spiralés                   | Mors Pozzi           | Insert           | Aspiration                                                                          | Ballonnet                                                                           | Vis cervicale                                                                       |               |
| Système assurant l'étanchéité vaginale | Coupole vaginale                                                                  | Joints silicone                                                                    |                  | Coupole vaginale                         | Corps de l'insert    | Coupole vaginale | Coupole vaginale                                                                    | Ballonnet vaginal                                                                   | Corps du manipulateur                                                               |               |
| Etanchéité après retrait de l'utérus   | ✓                                                                                 | ✗                                                                                  |                  |                                          |                      |                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |                                                                                     | ✗             |

| Société                                                  |  |  |                                           |                                       |                           |                                       |  |  |                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                      | Mangeshikar                                                                       | Keckstein                                                                          | Clermont-ferrand                          | Hohl                                  | Tintara                   | Donnez                                | SecuFix                                                                             | RUMI II                                                                             | Advincula Arch                                                                                    | Hystero-swing                                                                       |
| Canule pour test au bleu                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                  | ✓                                         | ✗                                     |                           |                                       | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Poignée avec rotation mécanique de la tige intra-utérine | ✗                                                                                 | ✓                                                                                  |                                           | ✗                                     |                           | ✓                                     | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                                   | ✗                                                                                   |
| Maniabilité globale du manipulateur (Anté + Rétro)       | Bonne                                                                             | antéversion 95°, rétroversion 30°, maintien angulation bloquée en continu          | Moyenne (5 positions d'arrêts de 0 à 90°) | Bonne                                 | Bonne                     | Moyenne                               | Bonne                                                                               | 90° antéversion, 50° rétroversion, maintien angulation bloquée                      | Bonne (Antéversion et rétroversion manuelles et maintien de position possible avec bras articulé) | Bonne                                                                               |
| Qualité de la mise en évidence de l'endroit de coupe     | Très bonne (anneau céramique blanche)                                             |                                                                                    | Moyenne (lame et non coupole)             | Très bonne (anneau céramique blanche) | Mauvaise (pas de coupole) | Très bonne (anneau céramique blanche) | Très bonne (transilluminateur)                                                      | Bonne                                                                               |                                                                                                   | Moyenne (lame et non coupole)                                                       |
| Résistance face à la coupe                               | Bonne (anneau céramique blanche)                                                  |                                                                                    | NA. Lame et non coupole                   | Bonne (anneau céramique blanche)      | Bonne                     | Bonne (anneau céramique blanche)      | Moyenne (plastique)                                                                 | Moyenne (plastique)                                                                 |                                                                                                   | NA. Lame et non coupole                                                             |

**STORZ**  
KARL STORZ — ENDOSKOPE


**THT**  
bio-science  
group

  
**delmont**  
imaging

Mangeshikar




Keckstein

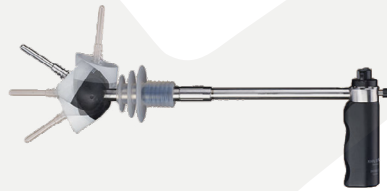

Donnez



Hystero-swing

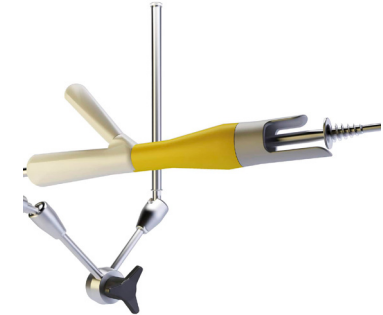

Hohl



Tintara




**RICHARD**  
**WOLF** 

SecuFix



Clermont -ferrand

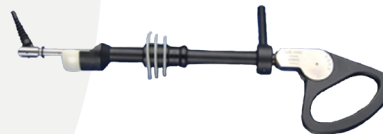

**CooperSurgical**

RUMI II



Advincula Arch

