




imaging all the women



NeoCare

Производительность и
универсальность




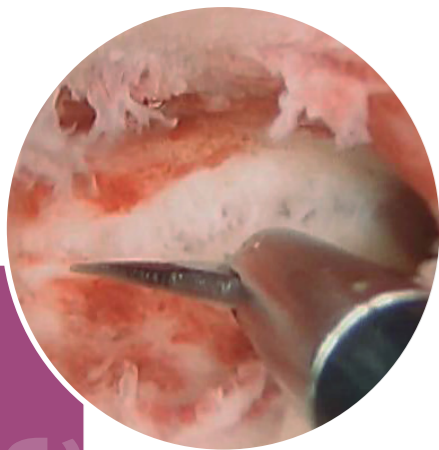

Полный комплект для оперативной гистероскопии

Для эффективного лечения большинства патологий матки

NeoCare был разработан для того, чтобы вы могли использовать инструменты 3 мм без ВЧ энергии, тем самым сохраняя эндометрий ваших пациентов. Даже в случае серьезных патологий, таких как большие кальцинированные миомы, мощность и точность жестких инструментов 3 мм позволяют эффективно лечить их, выполняя операцию в один этап. Биполярные электроды и резектоскоп 26Fg. дополняют стандартный набор и позволяют с уверенностью оперировать любые внутриматочные патологии матки.

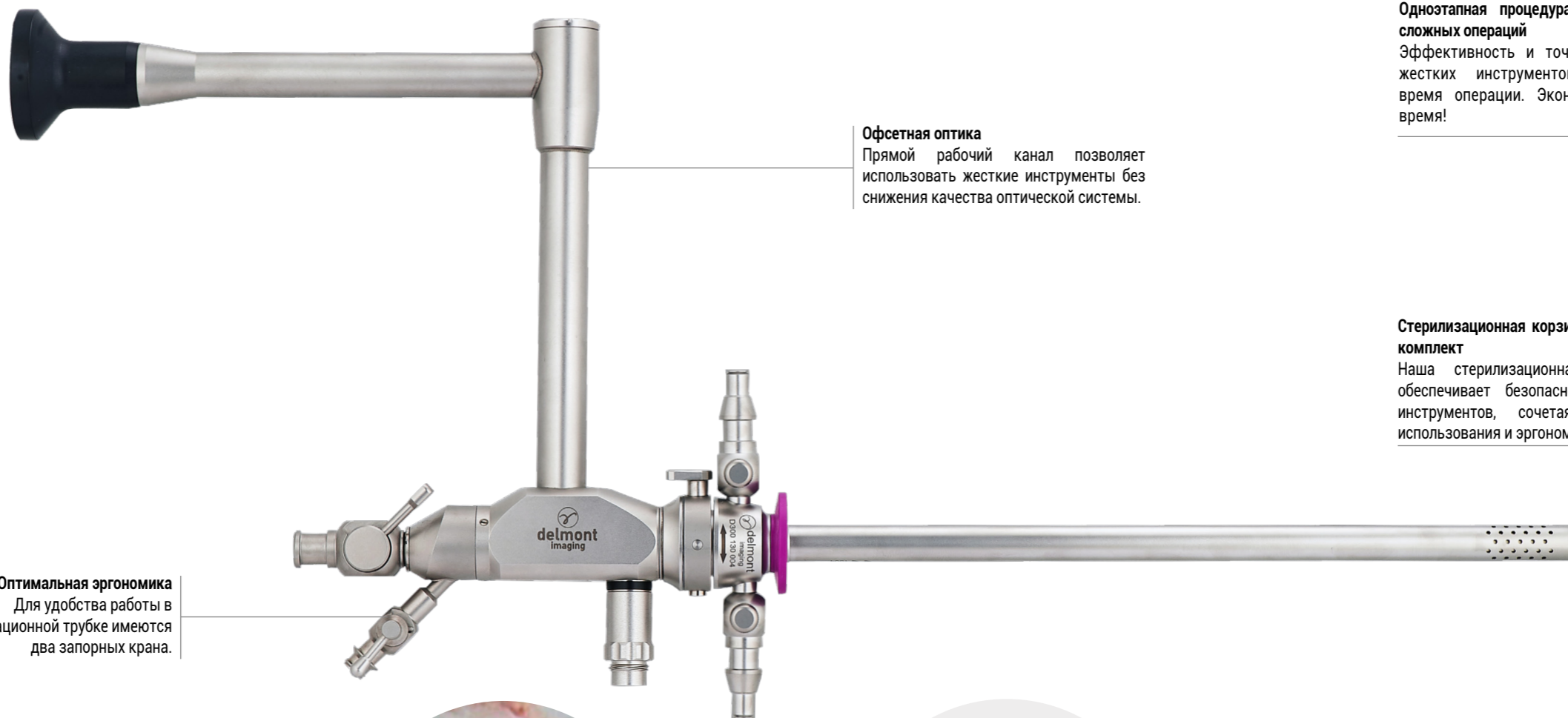


Оптимальная эргономика
Для удобства работы в ирригационной трубке имеются два запорных крана.

Офсетная оптика

Прямой рабочий канал позволяет использовать жесткие инструменты без снижения качества оптической системы.


Безопасность биполяра

Три вида биполярных электродов для лечения любых патологий матки.

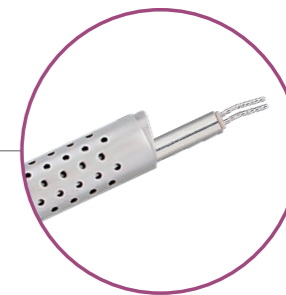

Одноэтапная процедура даже для сложных операций

Эффективность и точность 3-мм жестких инструментов снижают время операции. Экономьте свое время!

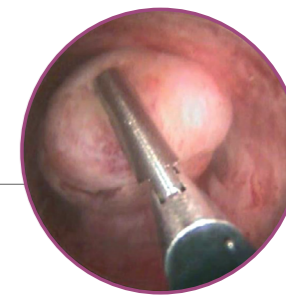


Стерилизационная корзина входит в комплект

Наша стерилизационная корзина обеспечивает безопасность ваших инструментов, сочетая простоту использования и эргономику.



Наивысшие технологические достижения

Операционный гистероскоп NeoCare был разработан для обеспечения наилучшей производительности и эргономики. Сочетание HD-линз с мощным и однородным освещением гарантирует яркое изображение с высоким разрешением. Кроме того, широкий рабочий канал (4,5 мм) обеспечивает эффективную ирригацию при использовании инструментов диаметром 3 мм. Рабочий канал снабжен запатентованной системой двойных клапанов, которая обеспечивает полную и надежную герметизацию.

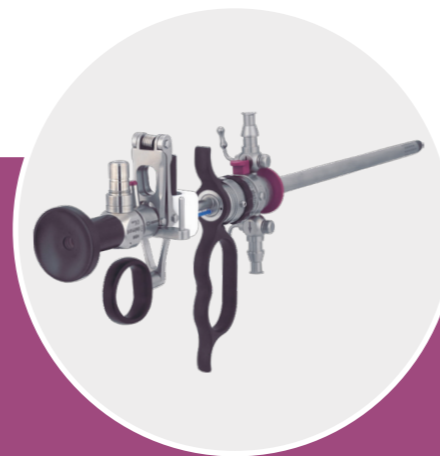

NeoCare+ для еще большей универсальности!

Поскольку внешний тубус NeoCare такой же, как у нашего резектоскопа MaxiCare, вы можете комбинировать их использование во время одной и той же операции. Тубус остается в матке при смене инструмента, устраняя риски травмирования шейки матки. Набор NeoCare+ сочетает в себе NeoCare и MaxiCare. Забота о ваших пациентах никогда не была такой простой.

Набор **NeoCare** - арт. D400 100 032

включает следующие элементы:

NeoCare операционный гистероскоп. 8 мм. 12°

90° офсетный окуляр. Автоклавируемый
Рабочий канал 12Fr.

арт. D300 100 051



Внешний тубус 26Fr.

Двойной поток. Quick-lock

арт. D300 130 004



Пластиковая рукоятка для инструментов 3 мм

С вращением. Без кремальеры
4 шт. в наборе

арт. D300 120 504



Прямые микро-ножницы 3 мм

Одна подвижная бранша. Рабочая длина: 330 мм

арт. D300 120 509



Изогнутые ножницы Метценбаум 3 мм

Две подвижные бранши. Рабочая длина: 330 мм

арт. D300 120 507



Универсальные захватывающие щипцы 3 мм

Зубчатые и волнообразные бранши
Две подвижные бранши. Рабочая длина: 330 мм

арт. D300 120 510



Захватывающие и экстракционные щипцы 3 мм. Зубья 2/3

Одна подвижная бранша. Рабочая длина: 330 мм

арт. D300 120 515



Электрод Ø 3 мм L-Hook

Рабочая длина: 360 мм

арт. D300 120 772



Электрод Ø 3 мм прямой

Рабочая длина: 360 мм

арт. D300 120 773



Электрод Ø 3 мм V-Hook

Рабочая длина: 360 мм

арт. D300 120 774



Световод

Автоклавируемый. Ø 3,5 мм. Д: 2,3 м. С коннекторами Storz

арт. D200 150 500



Корзина для стерилизации NeoCare

Включает в себя два лотка и крышку
С силиконовыми держателями

арт. D200 160 515



Набор **NeoCare+** - арт. D400 100 033 включает в себя наборы **NeoCare** и **MaxiCare**.