

Société										
Nom	Mangeshikar	Keckstein	Clermont -ferrand	Hohl	Tintara	Donnez	SecuFix	RUMI II	Advincula Arch	Hystero-swing
Réutilisable										
Parties à usages uniques	/	/	/	/	/	/	Coupole transilluminateur et tubes d'aspiration	Coupoles et tiges intra-utérines	/	
Nombre étapes d'assemblage	6	7	7	5	4	4	5	3	7	
Coupoles disponibles	3	4	3 Lames	4	Pas de coupole	3	1 «Polyvalente»	4	3	
Tiges intra-utérine disponibles	7	3 inserts fileté 6 inserts de travail	7	3 inserts fileté 9 inserts de travail	7 inserts de travail	3	1 (longueur modifiable)	6	5	
Système de fixation de l'utérus	Mors Pozzi	Vissage avec inserts filetés	Vis cervicale	Trois embouts spiralés	Mors Pozzi	Insert	Aspiration	Ballonnet	Vis cervicale	
Système assurant l'étanchéité vaginale	Coupole vaginale	Joints silicone		Coupole vaginale	Corps de l'insert	Coupole vaginale	Coupole vaginale	Ballonnet vaginal	Corps du manipulateur	
Etanchéité après retrait de l'utérus										

Société										
Nom	Mangeshikar	Keckstein	Clermont -ferrand	Hohl	Tintara	Donnez	SecuFix	RUMI II	Advincula Arch	Hystero-swing
Canule pour test au bleu	✗	✗	✓	✗			✗	✓		✗
Poignée avec rotation mécanique de la tige intra-utérine	✗	✓		✗		✓	✗	✓		✗
Maniabilité globale du manipulateur (Anté + Rétro)	Bonne	antéversion 95°, rétroversion 30°, maintien angulation bloquée en continu	Moyenne (5 positions d'arrêts de 0 à 90°)	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	90° antéversion, 50° rétroversion, maintien angulation bloquée	Bonne (Antéversion et rétroversion manuelles)	Bonne
Qualité de la mise en évidence de l'endroit de coupe	Très bonne (anneau céramique blanche)		Moyenne (lame et non coupole)	Très bonne (anneau céramique blanche)	Mauvaise (pas de coupole)	Très bonne (anneau céramique blanche)	Très bonne (transilluminateur)	Bonne		Moyenne (lame et non coupole)
Résistance face à la coupe	Bonne (anneau céramique blanche)		NA. Lame et non coupole	Bonne (anneau céramique blanche)	Bonne	Bonne (anneau céramique blanche)	Moyenne (plastique)	Moyenne (plastique)		NA. Lame et non coupole

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE


THT
bio-science
group


delmont
imaging

Mangeshikar




Keckstein

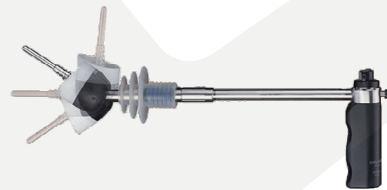

Donnez



Hystero-swing

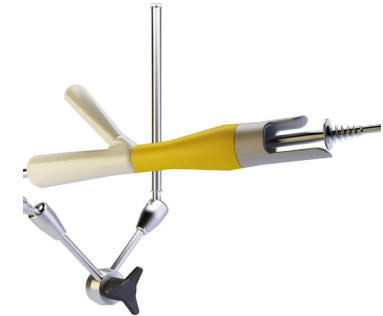

Hohl



Tintara



RICHARD
WOLF 

SecuFix



Clermont -ferrand



CooperSurgical

RUMI II



Advincula Arch

