

Le set **MiniCare** complet - Réf D400 100 045 comprend les éléments suivants :

Hystéroscope opératoire MiniCare 6mm. 12°

Oculaire déporté à 45°. Autoclavable.
Canal opératoire de 10Fr.

Réf. D300 100 049



Chemise externe 18,5Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 000



Poignée plastique pour instruments 3mm

Avec module de rotation. Sans crémaillère
4 unités sont incluses dans le set.

Réf. D300 120 533



Micro-ciseaux droits 3mm

1 mors mobile. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 509



Ciseaux courbés 3mm. Type Metzenbaum

2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 507



Pince à préhension universelle 3mm

Mors dentés et ondulés.
2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 510



Pince à préhension et extraction 3mm. 2x3 dents

1 mors mobile. Longueur utile : 330mm

Réf. D300 120 515



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Panier de stérilisation MiniCare

Comprend deux plateaux associables et un couvercle.
Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 521



Accessoires optionnels:

Electrode bipolaire crochet en L, Ø 3mm

Longueur utile : 350mm

Réf. D300 140 133



Electrode bipolaire droite, Ø 3mm

Longueur utile : 350mm

Réf. D300 140 134



Electrode crochet en V, Ø 3mm

Longueur utile : 350mm

Réf. D300 140 135



imaging all the women*



MiniCare

Le produit qu'il fallait inventer pour les patientes en âge de procréer



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

* Imagez toutes les femmes

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont de classe IIa et IIb et sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Document non contractuel. Copyright © 2021 SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging. REF: D900 700 192 A FR 2022-11. Imprime par ClipArt. Ne pas jeter sur la voie publique.




L'alliance parfaite entre préservation et performance

Pour soigner sans compromis toutes les pathologies utérines

MiniCare saura vous séduire pour le traitement de vos patientes, tout particulièrement celles en âge de procréer. Son faible diamètre externe réduit les étapes de dilatation et facilite le passage, même chez les patientes nullipares. La maniabilité est aisée et votre geste opératoire précis.

L'utilisation d'instruments 3mm sans énergie préserve l'endomètre de vos patientes. Même dans le cadre de pathologies majeures telles que les fibromes calcifiés de grandes tailles ou des cloisons utérines complètes, la performance de ces instruments rigides vous permet une prise en charge rapide et efficace.

Optique déportée
Pour un canal de travail droit permettant l'utilisation d'instruments rigides tout en conservant une qualité de vision HD !

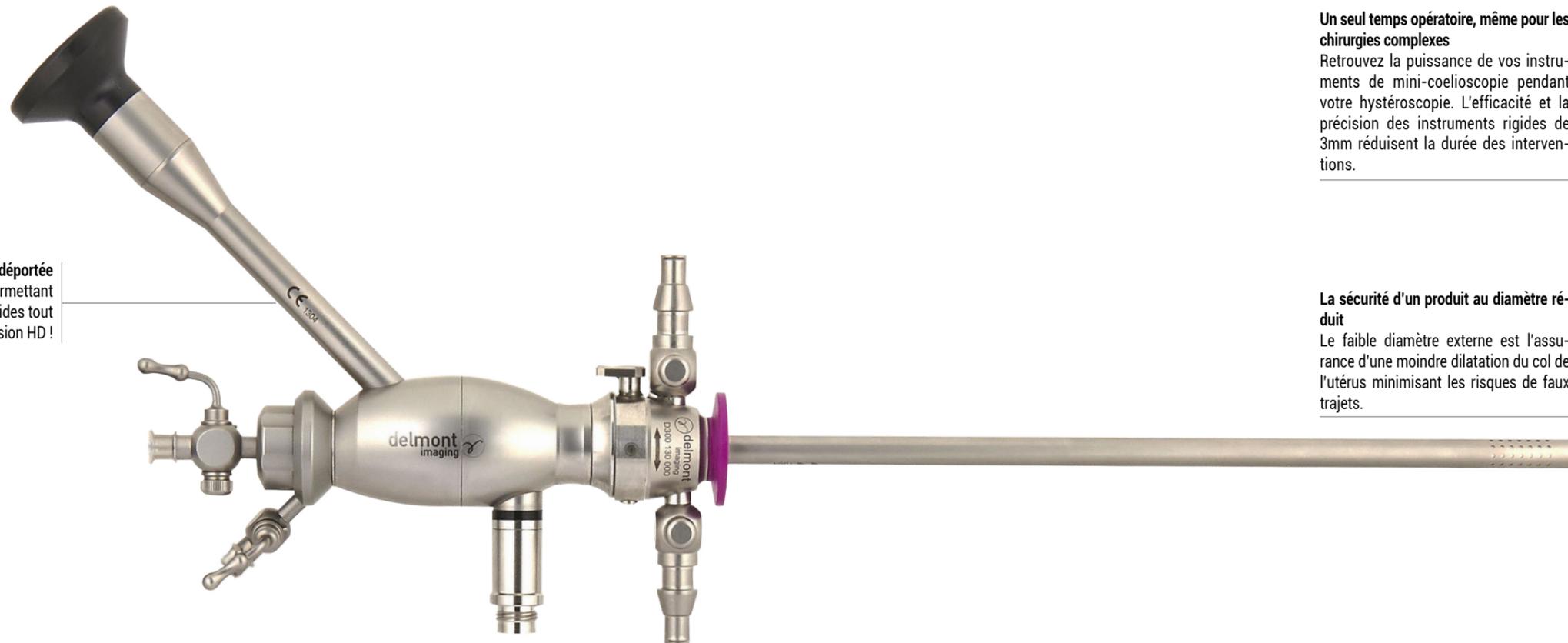


Trois formes d'électrodes bipolaires disponibles

Conservez la sûreté de la coagulation bipolaire à portée de main. Ces électrodes nouvelle génération pourront aussi être utilisées avec un courant de coupe.



Un seul temps opératoire, même pour les chirurgies complexes

Retrouvez la puissance de vos instruments de mini-coelioscopie pendant votre hystérocopie. L'efficacité et la précision des instruments rigides de 3mm réduisent la durée des interventions.

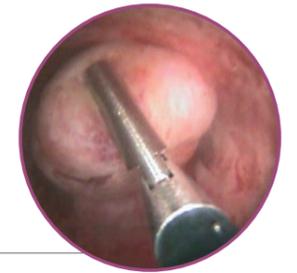

La sécurité d'un produit au diamètre réduit

Le faible diamètre externe est l'assurance d'une moindre dilatation du col de l'utérus minimisant les risques de faux trajets.



Un niveau d'exigence technique poussé jusque dans les moindres détails

L'hystéroscope opératoire MiniCare a été pensé afin de vous garantir une expérience utilisateur à la hauteur de vos attentes.

Le design unique de notre hystéroscope vous offre une prise en main naturelle, dégagant votre espace de travail pour une meilleure maniabilité des instruments.

L'association de lentilles HD avec un éclairage généreux et homogène vous garantissent une image lumineuse et pleinement résolue.



MiniCare+¹, le set d'instrumentation 2 en 1 !

La chemise externe de MiniCare est identique à celle de notre résecteur ReseCare. Ces deux produits étant complémentaires, vous pourrez combiner leur utilisation pendant une même chirurgie. La chemise externe reste positionnée dans l'utérus pendant le changement d'instrument, évitant toutes lacérations cervicales.

¹ : MiniCare+ = MiniCare + ReseCare