

Références et caractéristiques d'iSpark :

iSpark. Générateur d'électrochirurgie Haute Fréquence

Ecran tactile 7"
Connectiques :
- 2 prises Smart Device System
- 1 prise électrode neutre
- 1 prise de sonde Argon
Régulation automatique de la puissance
Alimentation électrique : (220-240 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 1 350 VA
Dimensions : 385 x 305 x 141 mm
Poids : 7,0 kg
Classification : Classe IIb, Type CF




Tous les programmes activés
Réf. D100 400 000

Seuls les programmes natifs activés
Réf. D100 400 001

Programmes URO/GYN activés
Réf. D100 400 002

Pédale filaire double

Coupe et coagulation
Réf. D100 400 003

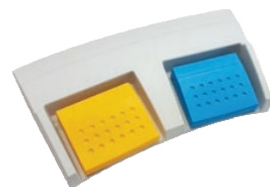

Pédale filaire simple

Coagulation
Réf. D100 400 004



Chariot pour générateur iSpark

Taille : 1,20m
Poids : 16,5 kg
1 plateau pour positionnement d'iSpark
1 poignée pour la maniabilité
1 panier pour accessoires
1 casier interne pour bouteille d'Argon
4 roues dont 2 avec frein
Réf. D100 400 005



Cable de résection bipolaire iSpark

Prise Smart Device System
Longueur : 4,5m
Compatible avec nos résecteurs ReseCare et MaxiCare
Réf. D200 190 007



Cable bipolaire Haute Fréquence iSpark

Prise Smart Device System
Longueur : 3,0m
Compatible avec nos instruments bipolaires (hystérocopie et laparoscopie)
Réf. D200 190 020



D'autres configurations de programmes et d'autres câbles Haute Fréquence sont disponibles.
Pour plus d'informations, nous consulter.



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 2274. Ils sont fabriqués par EMED SP Z.O.O. SP. K. ul. Ryzowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia, Pologne. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Document non contractuel. Copyright © 2022 SAS Delmont Imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont Imaging.

* Imagez toutes les femmes



imaging all the women*



iSpark
Étincelant de facilité



Un générateur simple, fiable et puissant qui s'adapte à toutes les situations !

Petit en taille, il convient parfaitement aux salles ambulatoires, mais peut également répondre aux besoins variés des blocs opératoires. De nombreuses autres fonctionnalités participent à la polyvalence d'iSpark, notamment ses multiples programmes, son niveau de performance ou encore sa modularité.


Extrêmement intuitif et simple d'utilisation sans pour autant compromettre la sécurité, vous ne pourrez plus vous en passer !



Plug & play¹ !

Nos deux prises SDS (Smart Device System²) reconnaissent le câble lors de son branchement et affichent automatiquement les programmes compatibles. Que ce soit pour des raisons de simplicité d'utilisation ou de sécurité, cette fonctionnalité ne manquera pas de vous séduire !

¹ : Branchez et utilisez
² : Fonctionnalité intelligente de l'appareil

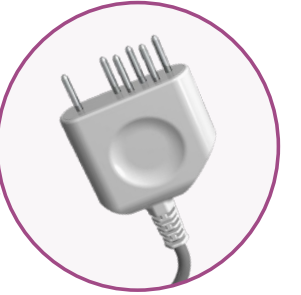

Une interface utilisateur à la hauteur.

Simplicité et intuitivité sont les maîtres-mots d'ordre de notre interface. Toutes les informations importantes sont visibles clairement depuis l'écran principal. Le grand écran tactile vous permet d'accéder et de modifier facilement les paramètres d'iSpark.



Un générateur qui suit votre usage.

Activez seulement les programmes qui vous sont nécessaires. Et si votre besoin évolue, iSpark saura facilement s'adapter. Il vous suffit de connecter une clé USB pour mettre à jour votre unité en quelques secondes !




La sécurité au cœur du produit

Tout a été mis en œuvre afin de vous offrir un produit sûr, composante fondamentale pour un générateur d'électrochirurgie à haute fréquence. La sécurité du patient est assurée tout au long de l'utilisation du produit : de la procédure d'autotest jusqu'au calcul de la puissance réelle appliquée.

Quelle que soit la pathologie traitée, iSpark mesure et ajuste automatiquement l'énergie délivrée afin d'obtenir le résultat souhaité pour un acte optimisé.

Pour les courants monopolaires, les contrôles vont jusqu'au monitoring de l'électrode neutre. Maîtrisez sa bonne application à tout moment de la procédure !

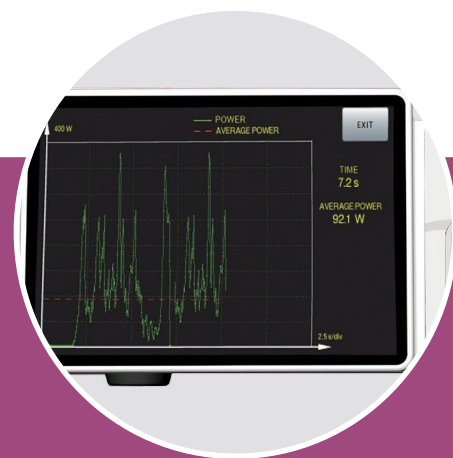

Généraliste ou spécialisé, iSpark satisfait tout usage et tout budget !

Avec jusqu'à 32 programmes disponibles, la polyvalence de notre générateur n'est pas à démontrer.

iSpark peut à la fois répondre à un besoin ciblé en salle dédiée, mais aussi convenir à une utilisation multi-spécialités dans un bloc opératoire.

Courants spécifiques d'arthroscopies, résection bipolaire, modes Argon ou encore fonctionnalité ThermoStapler®, retrouvez tous les programmes souhaités.