

Le set **EasyCare+** complet - Réf. D400 100 047
comprend les éléments suivants :

Hystéroscope HD. 2,9mm. 30°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 000



Chemise diagnostique graduée. 4mm

Robinet d'irrigation rotatif. L:270mm

Réf. D300 110 002



Chemise opératoire interne graduée. 4,9mm

Canal opératoire 7Fr. Robinet d'irrigation rotatif. L:230mm

Réf. D300 110 001



Chemise opératoire externe graduée. 5,5mm

Robinet d'aspiration rotatif. Encliquetage rapide. L:216mm

Réf. D300 110 000



NOUVEAU

Paire de ciseaux pointus graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage

L:370mm. 1 mors mobile

Réf. D300 120 065



NOUVEAU

Paire de ciseaux arrondis graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage

L:370mm. 1 mors mobile

Réf. D300 120 066




NOUVEAU

Pince à biopsies graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage

L:370mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 067

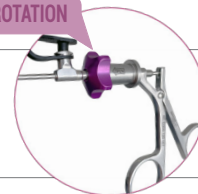

NOUVEAU

Pince à préhensions graduée (alligator). 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage

L:370mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 068



NOUVEAU

Pince à extractions graduée (DIU). 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage

L:370mm. 2 mors mobiles

Réf. D300 120 069



Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Panier de stérilisation EasyCare

Autoclavable. 540x240x70mm. Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 522



Accessoires optionnels :

Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type bouton

Réf. D300 140 010



Electrode bipolaire flexible 5 Fr. de type pointe

Réf. D300 140 011



Zone Athélia IV - 297, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

* Imagez toutes les femmes
** Voir et traiter


Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont de classe I, IIa et IIb et sont fabriqués par Delmont Imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Document non contractuel. SAS Delmont Imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont Imaging. REF 0900 700 002 H FR 2023-09. Imprimé par Grafikom. Ne pas jeter sur la voie publique.

Imont Imaging.



imaging all the women*

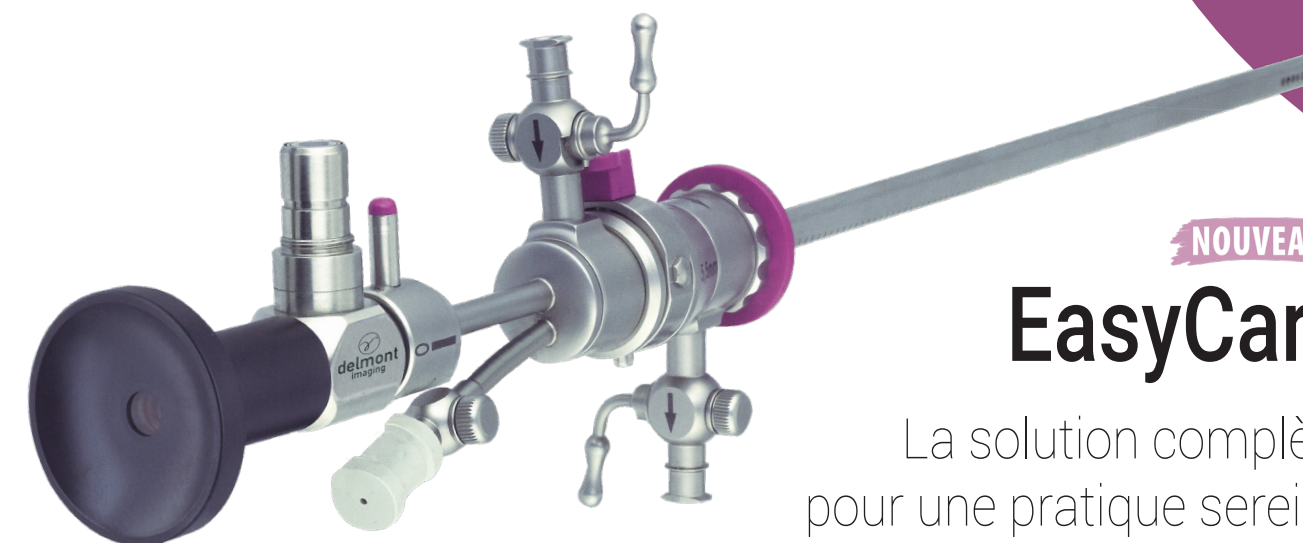

NOUVEAU

EasyCare

La solution complète
pour une pratique sereine
du See&Treat**

D'après le Pr. H. Fernandez






« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystéroscopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution **EasyCare** avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. »

Pr. Hervé Fernandez. Chef de service de Gynécologie-Obstétrique à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre

EasyCare. Un set, trois outils possibles.

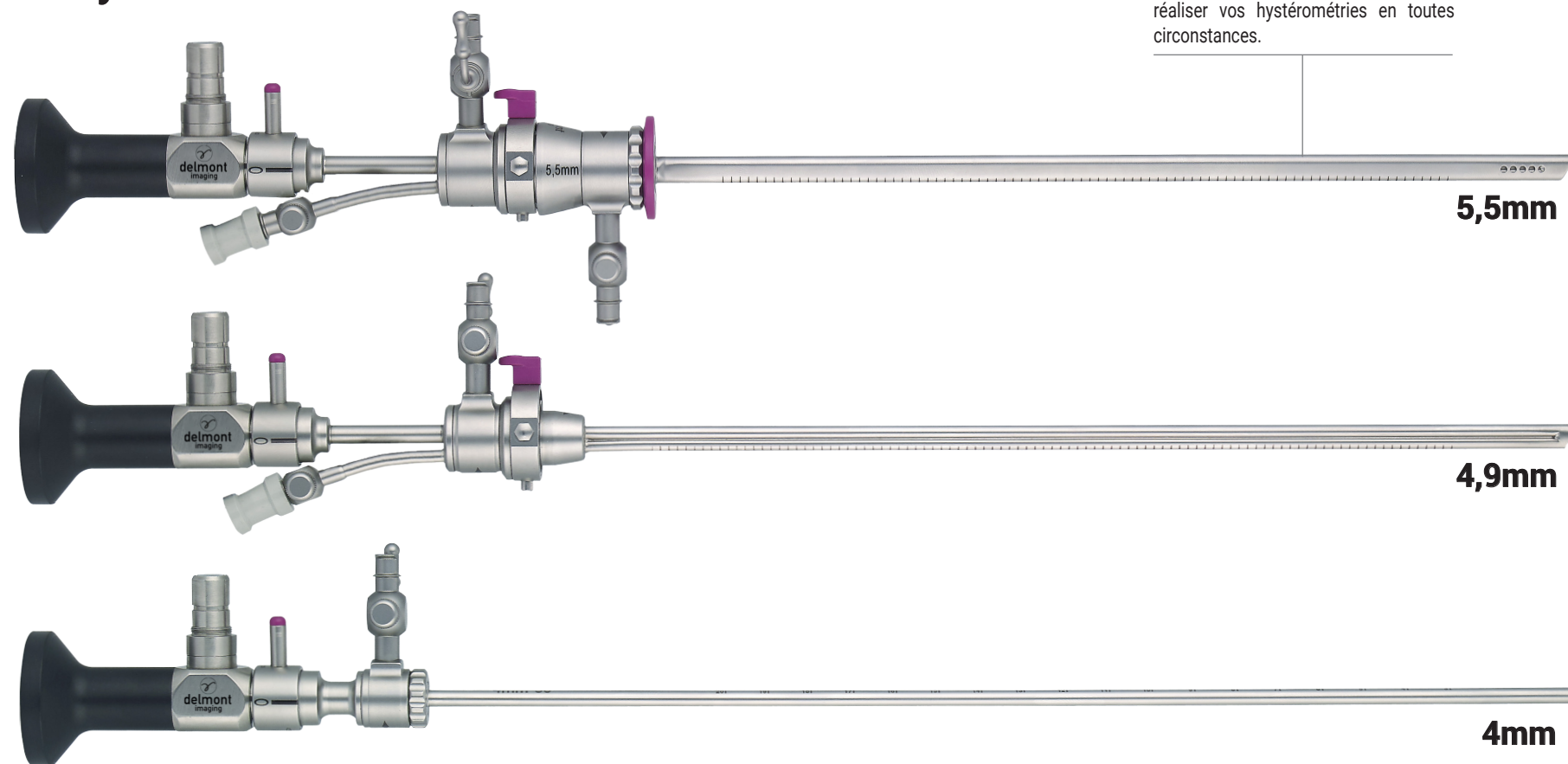

Marquage centimétrique

Le marquage centimétrique est présent sur toutes les chemises. Vous pourrez réaliser vos hystérométries en toutes circonstances.


Chemise interne atraumatique de 4,9mm

Avec son extrémité totalement émoussée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.



Robinsets rotatifs

Pour que vous ne soyez jamais gênés et toujours dans la meilleure position, orientez chaque robinet indépendamment.

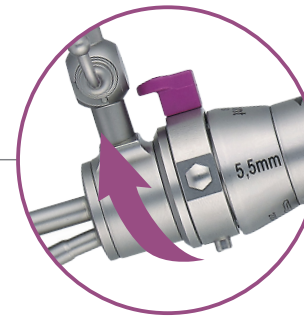


Encliquetage rapide

La fin des verrouillages laborieux !

Instruments semi-rigides rotatifs

Nos instruments incluent un nouveau module de rotation facilitant l'utilisation et diminuant grandement les risques de torsion. Votre confort et la durée de vie de vos instruments sont ainsi améliorés.


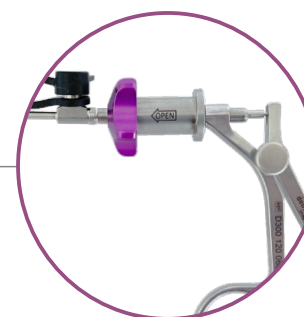


Pensé jusqu'au moindre détail

Toutes les phases d'utilisation du produit sont simplifiées : le montage et démontage de la poignée en un geste via l'encliquetage rapide tout comme le nettoyage grâce à un canal Luer-lock ultra-accessible.

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

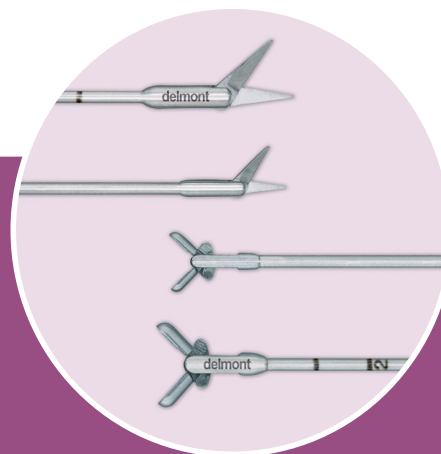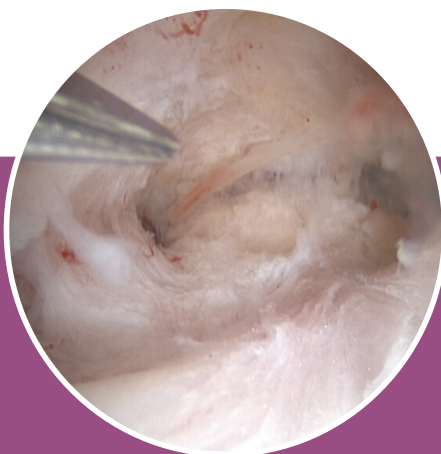

L'efficacité du 7Fr.¹ !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues² que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur³ à son homologue en 5Fr. ! L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr.

Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

¹ : 1mm = 3Fr.
² : 5,7mm vs 3,8mm
³ : 8,23mm³ vs 3,2mm³