



*imaging all the women**



Oxiplex®
La touche finale
à vos chirurgies
gynécologiques

Avec le gel anti-adhérentiel **Oxiplex**, valorisez votre pratique chirurgicale en réduisant les adhérences post-opératoires.

Les adhérences, première complication après les chirurgies hystéroscopiques et coelioscopiques.


Les adhérences sont responsables de divers symptômes, que ce soit en hystéroscopie¹ ou en coelioscopie², pouvant entraîner des réinterventions.

Agissant comme une barrière physique séparant les tissus lors du processus de cicatrisation, Oxiplex permet de réduire significativement³ les adhérences post-opératoires et ainsi améliorer vos résultats chirurgicaux.

1. Infertilité, dysménorrhées, anomalies du cycle menstruel, fausses couches récurrentes.

2. Douleurs pelviennes chroniques, occlusions intestinales.

Nombre de patientes avec des adhérences De Novo post-chirurgies hystéroscopiques dans le cadre d'une étude randomisée sur 110 patientes

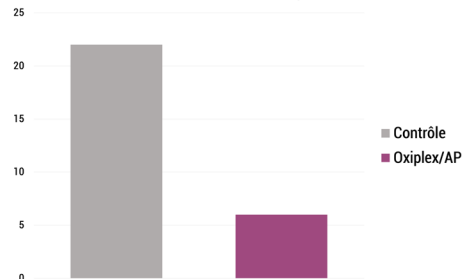

3. Di Spiezo et al. Efficacy of a polyethylene oxide-sodium carboxymethylcellulose gel in prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery. J.MIG.2011.Apr;18(4):462-9.

Oxiplex, un gel anti-adhérentiel aux nombreuses qualités.



Prêt à l'emploi



Haute **viscosité**.
Adhère aux tissus.



Stockage à température
ambiante (2 à 25°C)




Durée de résidence de
30 jours avant résorption



Biocompatible et
synthétique



Simple
d'utilisation

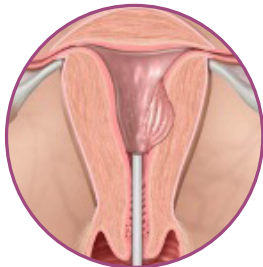

CMC et PEO : un duo gagnant.

Oxiplex est composé de deux polymères : le carboxyméthylcellulose (CMC) et l'oxyde de polyéthylène (PEO). La haute viscosité du gel mais également son important temps de résidence est dû au CMC. Tandis que le PEO permet une réduction de la production de fibrine, protéine à l'origine des adhérences. Ensemble, ces deux polymères font d'Oxiplex une solution anti-adhérentielle hautement efficace.

Un gel, deux applications cliniques.

Oxiplex/IU est le gel anti-adhérentiel dédié à l'hystéroscopie, Oxiplex/AP est celui dédié à la coelioscopie. La composition des gels est identique mais la quantité diffère tout comme l'applicateur inclut dans le produit.



Références :

Oxiplex/IU - Gel anti-adhérentiel intra-utérin

Contient 1 seringue de 10mL et 1 applicateur
Stérile. A usage unique. Livré par 10

Réf. D260 100 000

Oxiplex/AP - Gel anti-adhérentiel coelioscopique

Contient 2 seringues de 20mL et 1 applicateur
Stérile. A usage unique. Livré par 10

Réf. D260 100 001