



*imaging all the women**



NOUVEAU

Nos colposcopes

maintenant combinés à **iCare^{mini}**
pour encore plus de performances


delmont
imaging



Une gamme complète de colposcopes

Qualité d'image exceptionnelle et performances hors normes

Les composants optiques de nos colposcopes sont fabriqués en Allemagne. Ils vous garantissent une qualité d'image irréprochable et des examens d'une très grande précision. Parmi un large choix de modèles et d'accessoires, nous vous proposerons LA solution adaptée à votre pratique. De plus, le compte rendu intuitif généré par notre application imagyn vous permettra de renforcer votre communication patiente.




Un système optique au service de votre confort de travail

Avec notre objectif Variofocus, vous pourrez rester net sur une distance de travail de 200 à 350mm. Plus besoin d'avancer ou de reculer le colposcope au cours de l'examen pour une bonne visualisation du col et du vagin. La distance inter-pupillaire et les dioptries sont ajustables sur tous nos modèles pour une parfaite adaptation à votre vue. Enfin, les niveaux de grossissements disponibles vous permettront de toujours obtenir le champ de vision souhaité.

Profitez d'une image ultra-définie !

Nos lentilles apochromatiques corrigent les aberrations chromatiques et sphériques, et permettent ainsi d'obtenir une image fidèle. Combinées avec notre source de lumière LED, visualisez une image avec un rendu optimal des couleurs.

Le filtre vert de nos colposcopes est essentiel pour augmenter le contraste entre la muqueuse et les vaisseaux sanguins et ainsi faciliter l'identification des rugosités, des granulations et des régions hyper-vascularisées.

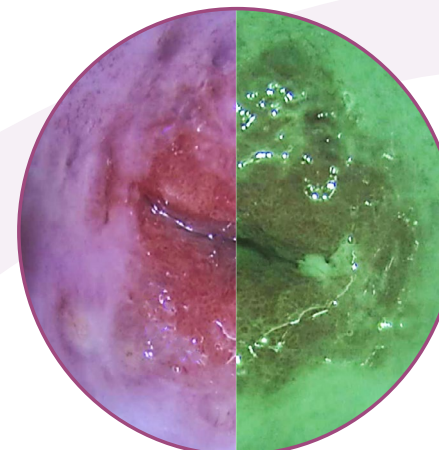

Une diversité de solutions pour un produit adapté à votre besoin

Que vous recherchiez un encombrement minimum, un espace de travail sans obstacle ou le confort d'un bras pivotant, toutes ces configurations sont disponibles dans notre gamme.

La maniabilité et l'équilibre de nos bras permettent de les positionner avec un seul doigt !



Et parmi notre large choix d'accessoires, que vous souhaitiez connecter un appareil photo, visualiser l'image sur un moniteur ou encore utiliser un laser, nous avons une solution pour vous !





Une gamme complète de colposcopes

Qualité d'image exceptionnelle et performances hors normes

Les composants optiques de nos colposcopes sont fabriqués en Allemagne. Ils vous garantissent une qualité d'image irréprochable et des examens d'une très grande précision. Parmi un large choix de modèles et d'accessoires, nous vous proposerons LA solution adaptée à votre pratique. De plus, le compte rendu intuitif généré par notre application imagyn vous permettra de renforcer votre communication patiente.



Un système optique au service de votre confort de travail


Avec notre objectif Variofocus, vous pourrez rester net sur une distance de travail de 200 à 350mm. Plus besoin d'avancer ou de reculer le colposcope au cours de l'examen pour une bonne visualisation du col et du vagin. La distance inter-pupillaire et les dioptries sont ajustables sur tous nos modèles pour une parfaite adaptation à votre vue. Enfin, les niveaux de grossissements disponibles vous permettront de toujours obtenir le champ de vision souhaité.



Découvrez une toute nouvelle façon d'aborder vos comptes rendus de colposcopie !

Avec son capteur CMOS HD, notre nouvelle caméra iCare mini vous permet de réaliser photos et vidéos de vos examens. Directement branchée au colposcope, et grâce à sa taille réduite, votre espace de travail est optimisé. Pouvant être utilisée en association avec notre application imagyn, ce duo saura vous séduire !

Développée pour les iPad Pro et disponible sur l'AppStore, imagyn vous permet une gestion complète de vos examens de colposcopie. De la création de la fiche patiente au partage du compte-rendu, tout a été imaginé afin de vous offrir une expérience utilisateur de haut niveau : l'alliance parfaite entre efficacité, pertinence et intuitivité.

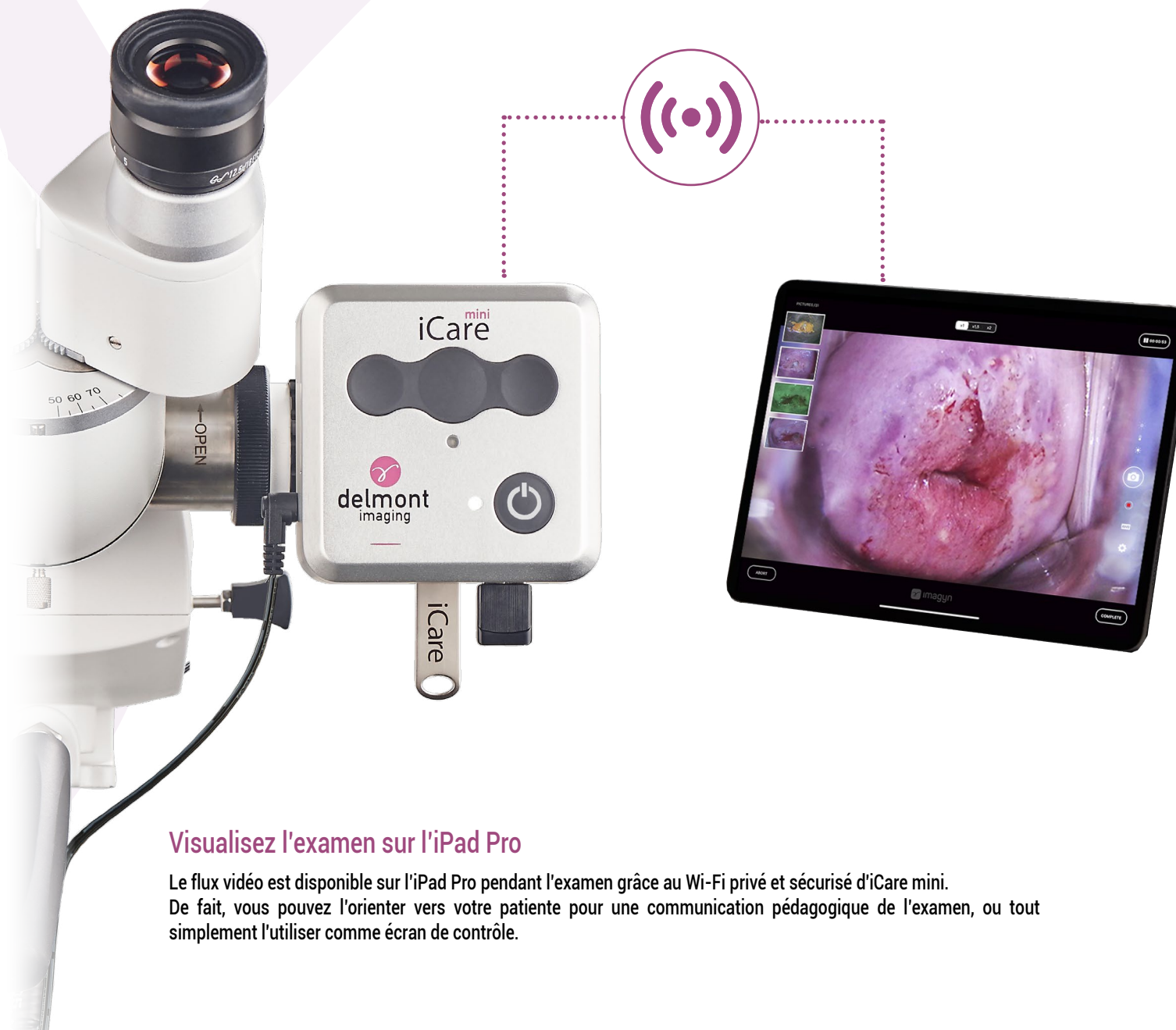


Visualisez l'examen sur l'iPad Pro

Le flux vidéo est disponible sur l'iPad Pro pendant l'examen grâce au Wi-Fi privé et sécurisé d'iCare mini. De fait, vous pouvez l'orienter vers votre patiente pour une communication pédagogique de l'examen, ou tout simplement l'utiliser comme écran de contrôle.

Un compte rendu complet en quelques clics seulement !

Tout a été réfléchi afin de transformer la tâche laborieuse du compte rendu en une expérience rapide et intuitive, sans en sacrifier ni la qualité, ni son exhaustivité. En quelques secondes, finalisez votre document qui comprend : schémas anatomiques à annoter, photos de l'examen à légender et plus d'une dizaine de champs textes à remplir. La qualité des comptes rendus que vous remettez à vos patientes et confrères n'a jamais atteint un tel niveau !

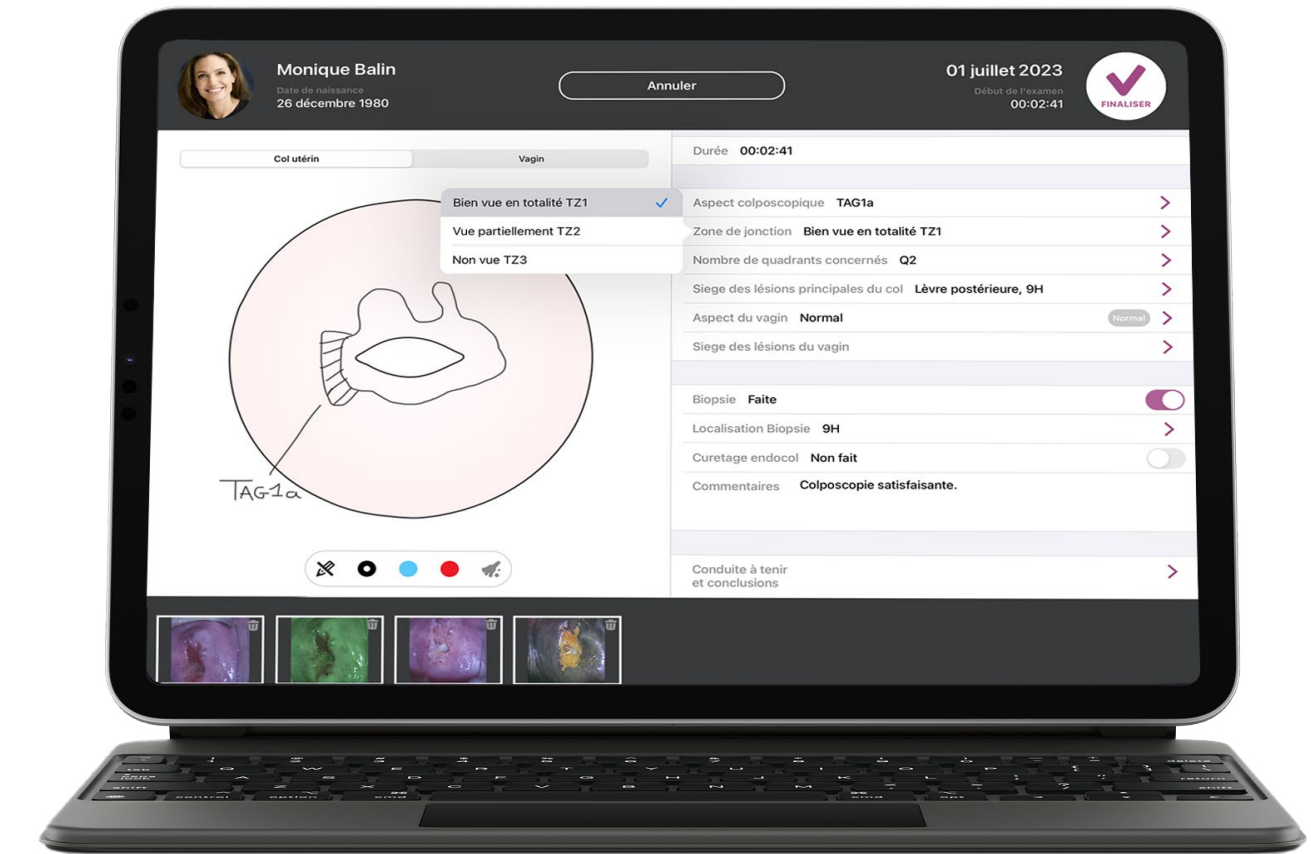

En cabinet privé ou à l'hôpital, imagyn s'adapte à vos besoins

En cabinet de ville, sauvegardez et sécurisez vos données sur un NAS (Network Attached Storage) rendu compatible avec imagyn. Quelle que soit la situation rencontrée avec votre iPad (perte, casse, etc.) vous pourrez restaurer l'intégralité de vos informations sur un nouvel iPad.



En clinique ou à l'hôpital, partagez les comptes rendus d'examen sur le réseau afin qu'ils intègrent automatiquement les dossiers patients informatisés (DPI). Ne perdez plus votre temps à le faire manuellement, imagyn et iCare mini le réalisent pour vous en utilisant le protocole standardisé HL7. La Worklist (liste des patients du jour) peut également être fournie à imagyn par le centre de soins grâce à la norme DICOM.

Références et caractéristiques de nos Colposcopes :

Colposcope bras pivotant

5 grossissements : 2,83x ; 4,25x ; 7,08x ; 11,33x ; 17,71x

Poids : 44kg

Hauteur ajustable : de 335 à 1 295mm

Spécifications :

Lumière : LED 100 000 lux

Lentilles apochromatiques

Oculaire : 12,5x

Binoculaire à 45°

Filtre vert

Objectif fixe de 300mm

Plage de netteté fine de 11mm

Réf. D100 300 502

Objectif à focale variable

F=200 à 350mm

Réf. D100 300 503



Colposcope par dessus l'épaule

5 grossissements : 2,83x ; 4,25x ; 7,08x ; 11,33x ; 17,71x

Poids : 44kg

Hauteur ajustable : de 635 à 1 295mm

Spécifications : Voir Colposcope bras pivotant

Objectif fixe de 300mm

Plage de netteté fine de 11mm

Réf. D100 300 506

Objectif à focale variable

F=200 à 350mm

Réf. D100 300 507



Colposcope support droit

3 grossissements : 4,25x ; 7,08x ; 11,33x

Poids : 18,14kg

Hauteur ajustable : de 1 016 à 1 193mm

Spécifications : Voir Colposcope bras pivotant

Objectif fixe de 300mm

Plage de netteté fine de 11mm

Réf. D100 300 500

Objectif à focale variable

F=200 à 350mm

Réf. D100 300 501



Accessoires optionnels :

Séparateur de faisceau double

50/50 & 20/80

Réf. D100 300 003



Adaptateur pour caméra vidéo

Compatible monture C et CS

Réf. D100 300 005



iCare mini

Caméra de colposcopie avec capteur CMOS HD

Connectique monture CS

1 sortie vidéo micro HDMI

Réf. D100 300 550



iPad Pro® 12,9" 256Go

Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048

Fourni avec son clavier et son stylet

Réf. D100 200 500

Licence imagyn

Application de gestion de base de données pour la colposcopie.
Sans fonction de sauvegarde de données. Sans interopérabilité.

Réf. D100 200 114