



imaging all the women




NEW

Кольпоскопы

теперь в комбинации с **iCare^{mini}**
для еще большей эффективности


delmont
imaging

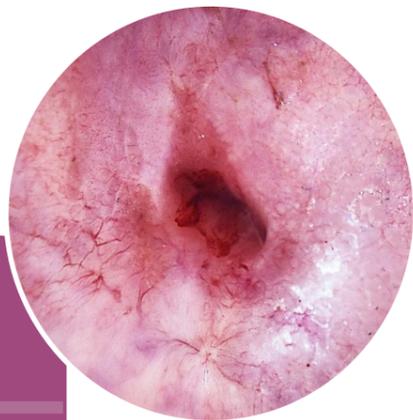

Полная линейка кольпоскопов

Исключительное качество изображения и выдающаяся производительность

Оптические компоненты наших кольпоскопов производятся в Германии. Это гарантируют отличное качество изображения и высокую точность исследований. Мы предложим подходящее для вашей практики решение из широкого ассортимента моделей и аксессуаров. Кроме того, интуитивно понятный отчет, создаваемый нашим приложением **imagyn™** улучшит ваше общение с пациентами.




Оптическая система, повышающая комфорт работы

С нашим вариофокусным объективом вы сможете сохранять резкость на рабочем расстоянии от 200 до 350 мм. Для хорошей визуализации шейки матки и влагалища не нужно перемещать кольпоскоп вперед или назад во время осмотра. Межзрачковое расстояние и диоптрии регулируются во всех наших моделях для адаптации к вашему зрению. И, наконец, благодаря различным уровням увеличения, вы всегда получите необходимое вам поле зрения.

Насладитесь четким изображением!

Наши апохроматические линзы компенсируют хроматические и сферические aberrации, обеспечивая достоверное изображение с оптимальной цветопередачей. Зеленый фильтр необходим для повышения контраста между слизистой оболочкой и кровеносными сосудами. Грубые поверхности, грануляции и гипертрофизированные участки будут быстро и легко идентифицированы.

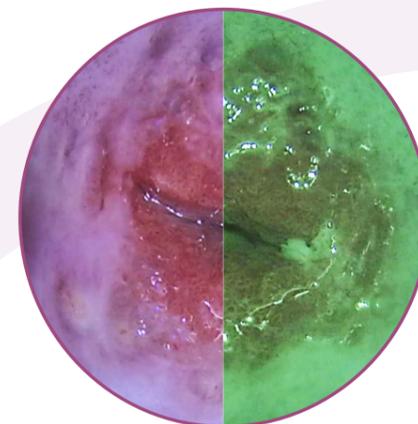

Полный спектр решений, адаптированных к вашим потребностям

Если вы ищете прибор, занимающий минимальную площадь, или прибор, не создающий препятствий в рабочем пространстве или вам важно удобство поворотного кронштейна - все эти конфигурации представлены в нашей линейке.

Балансировка поворотного кронштейна позволяет перемещать его одним пальцем!



Вы можете подключить кольпоскоп к камере, можете вывести изображение на монитор, можете использовать лазер - среди широкого выбора аксессуаров, у нас найдется решение для вас!





Полная линейка кольпоскопов

Исключительное качество изображения и выдающаяся производительность

Оптические компоненты наших кольпоскопов производятся в Германии. Это гарантируют отличное качество изображения и высокую точность исследований. Мы предложим подходящее для вашей практики решение из широкого ассортимента моделей и аксессуаров. Кроме того, интуитивно понятный отчет, создаваемый нашим приложением **imagyn™** улучшит ваше общение с пациентами.



Оптическая система, повышающая комфорт работы

С нашим вариофокусным объективом вы сможете сохранять резкость на рабочем расстоянии от 200 до 350 мм. Для хорошей визуализации шейки матки и влагалища не нужно перемещать кольпоскоп вперед или назад во время осмотра. Межзрачковое расстояние и диоптрии регулируются во всех наших моделях для адаптации к вашему зрению. И, наконец, благодаря различным уровням увеличения, вы всегда получите необходимое вам поле зрения.

imagyn X iCare^{mini}

Откройте для себя новый способ работы с кольпоскопическими отчетами!

Благодаря сенсору HD CMOS наша новая камера **iCare mini** позволяет снимать фото и видео во время обследований. Она подключается непосредственно к кольпоскопу и благодаря своим малым размерам не занимает ваше рабочее пространство.

Разработанное для **iPad Pro** и доступное в **AppStore**, наше приложение **imagyn** позволяет вам управлять кольпоскопическими исследованиями. Начиная с создания файла пациента и заканчивая передачей отчета, все продумано до мельчайших деталей и удобно реализовано: идеальное сочетание эффективности, точности и интуитивности.



Следите за обследованием на iPad Pro

Видеотрансляция с **iCare mini** на **iPad Pro** доступна во время обследования через наш частный и безопасный Wi-Fi. Это означает, что вы можете повернуть экран планшета к пациенту для общения во время обследования или просто использовать его в качестве контрольного экрана.

Полный отчет всего за несколько кликов!

Все продумано до мелочей, чтобы превратить трудоемкую задачу написания отчета в быстрое и интуитивно понятное занятие, не жертвуя при этом ни его качеством, ни полнотой. Всего за несколько секунд вы создадите документ, который включает в себя: аннотируемые анатомические рисунки и фотографии исследования, а также более десятка текстовых полей для заполнения. Качество отчетов, которыми вы делитесь с пациентами и коллегами, еще никогда не было таким высоким!



В офисе или в больнице imagyn адаптируется к вашим потребностям

Если вы работаете в офисе, создайте резервную копию и защитите свои данные на сетевом хранилище **NAS** (Network Attached Storage), совместимом с **imagyn**. Что бы ни случилось с вашим **iPad** (потеря, поломка и т. д.), вы сможете восстановить всю свою информацию на новом планшете.

В клинике или больнице обменивайтесь протоколами обследований по сети, чтобы они автоматически интегрировались в электронную медицинскую карту (EHR). Не тратьте время на ручную работу, **imagyn** и **iCare mini** сделают это за вас, используя стандартизированный протокол HL7. Рабочий список также может быть предоставлен **imagyn** медицинским центром с использованием стандарта DICOM.

Артикулы и тех. характеристики Кольпоскопов:

Кольпоскоп на поворотном штативе

5 степеней увеличения: 2.83x; 4.25x; 7.08x; 11.33x; 17.71x
Вес: 44 кг
Диапазон регулировки высоты: 335 - 1 295 мм

Технические характеристики:

Свет: LED 100 000 люкс
Апохроматические линзы
Окуляр: 12.5x
45° бинокулярная головка
Зеленый светофильтр

300 мм фикс. объектив

11 мм диапазон точной фокусировки

Арт. D100 300 502

Объектив с перем. фокусным
расстоянием F=200 - 350 мм

Арт. D100 300 503



Кольпоскоп с верхним штативом

5 степеней увеличения: 2.83x; 4.25x; 7.08x; 11.33x; 17.71x
Вес: 44 кг
Диапазон регулировки высоты: 635 - 1 295 мм

Технические характеристики: см. Кольпоскоп на поворотном штативе

300 мм фикс. объектив

11 мм диапазон точной фокусировки

Арт. D100 300 506

Объектив с перем. фокусным
расстоянием F=200 - 350 мм

Арт. D100 300 507



Кольпоскоп на прямом штативе

3 степени увеличения: 4.25x; 7.08x; 11.33x
Вес: 18,14 кг
Диапазон регулировки высоты: 1 016 - 1 193 мм

Технические характеристики: см. Кольпоскоп на поворотном штативе

300 мм фикс. объектив

11 мм диапазон точной фокусировки

Арт. D100 300 500

Объектив с перем. фокусным
расстоянием F=200 - 350 мм

Арт. D100 300 501



Принадлежности:

Двойной делитель луча

50/50 & 20/80

Арт. D100 300 003



Адаптер видеокамеры

Совместим с креплением C и CS

Арт. D100 300 005



iCare mini

Кольпоскопическая камера с сенсором HD CMOS

Крепление CS

1 видео-выход micro HDMI

Арт. D100 300 550



iPad Pro® 12.9" 256Gb

Дисплей Retina, разрешение 2 732 x 2 048

Поставляется с клавиатурой и стилусом.

Арт. D100 200 500

Лицензия imagyn license

Приложение для управления базой данных по кольпоскопии для iPad.
Без функции резервного копирования данных. Без interoperability.

Арт. D100 200 114