



*imaging all the women*



**NEW**

# EasyCare

Комплексное решение  
See&Treat для безопасной  
гистероскопии

*Проф. Н. Fernandez*






«Множество процедур может быть выполнено вне операционной во время диагностической гистероскопии, не требуя последующей госпитализации пациентов под наркозом. Это одно из многочисленных преимуществ концепции See&Treat. Кроме того, это сокращение загрузки операционной и освобождение ее для тяжелых операций. Для See&Treat необходимо иметь комплексное и эффективное оборудование. EasyCare предлагает законченное решение с удобными тубусами, но главное это набор инструментов 7 Fr., которые в работе намного эффективнее традиционных 5 Fr. Точные движения, быстрый результат, довольный пациент...»

Проф. Hervé Fernandez. Руководитель отделения OB/GYN Kremlin Bicêtre Hospital. Франция

## EasyCare. Один набор, три устройства.

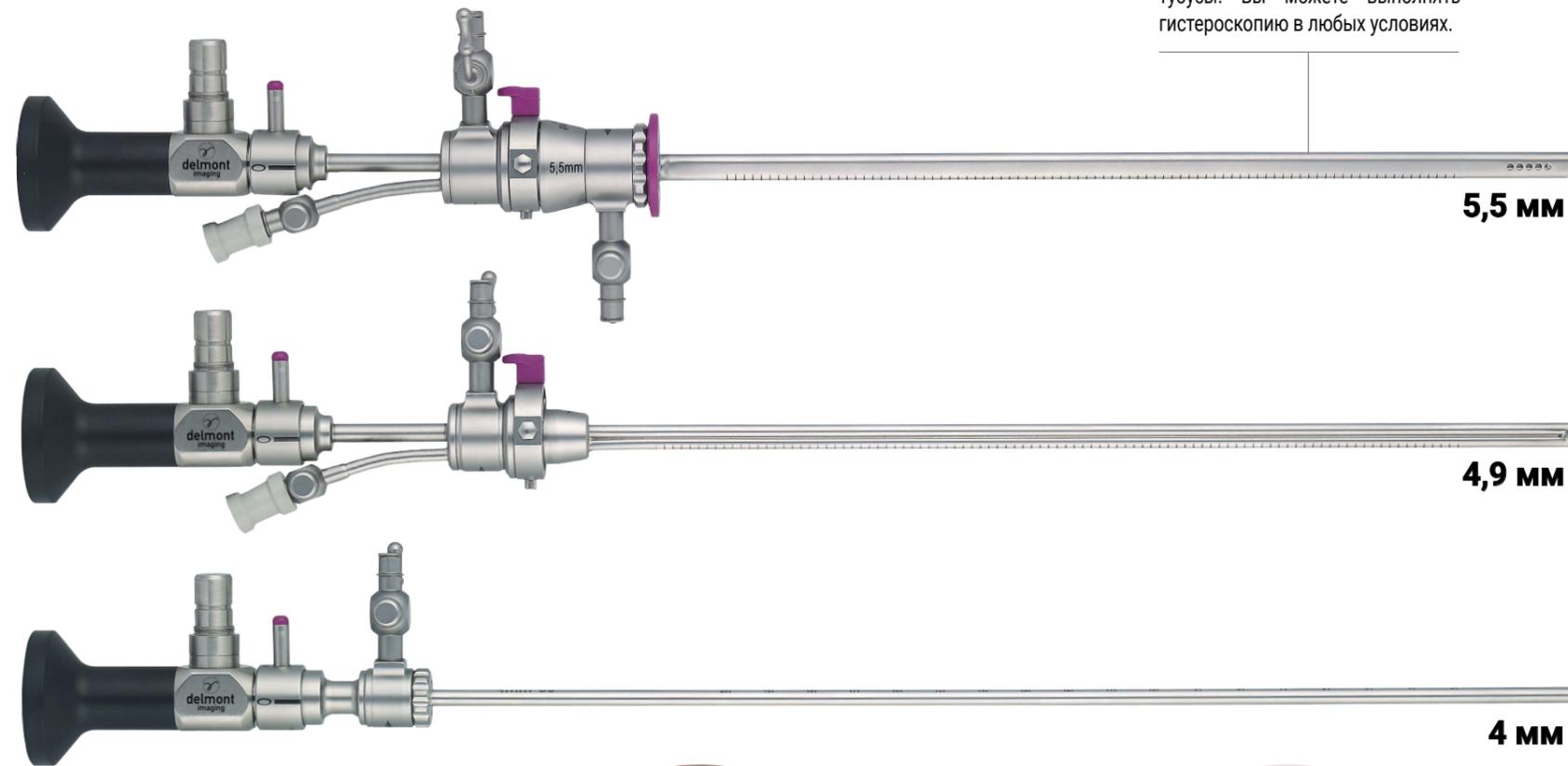

### Маркеры глубины

Маркеры нанесены на все тубусы. Вы можете выполнять гистероскопию в любых условиях.

### Внутренний атравмат. тубус 4,9 мм

Тупой наконечник и еще меньший диаметр, внутренний тубус был разработан для использования без внешнего тубуса. Это идеальный инструмент для манипуляций, не требующих аспирации, таких как контрацепция, извлечение внутриматочного устройства или рассечение синехий типа 1 или 2.



### Вращающиеся краники

Всегда в самом удобном положении для комфортабельной работы!



### Быстроразъемный замок Quick lock

Больше никаких сложностей с замками.

### Вращающиеся полужесткие инструменты

Наши инструменты оснащены новым ротационным модулем, облегчающим использование и значительно снижающим риск скручивания. Таким образом, повышается комфорт и срок службы инструментов.





### Продумано до мельчайших деталей

Все этапы использования упрощены: сборка и разборка рукоятки одним движением благодаря замку Quick lock, а также очистка благодаря легкодоступному каналу Luer-lock.

## HD гистероскоп: непревзойденная производительность и долговечность

Новейшее поколение линз, разработанных для получения преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределение света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным и долговечным, но, при этом, легко ремонтируемым в случае поломки.

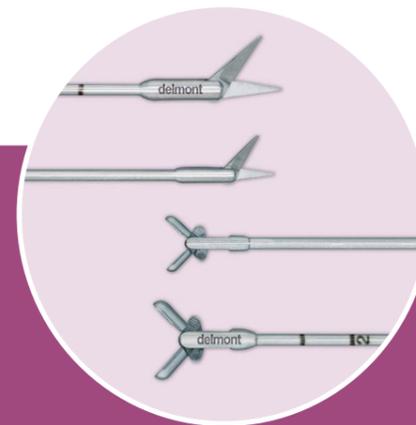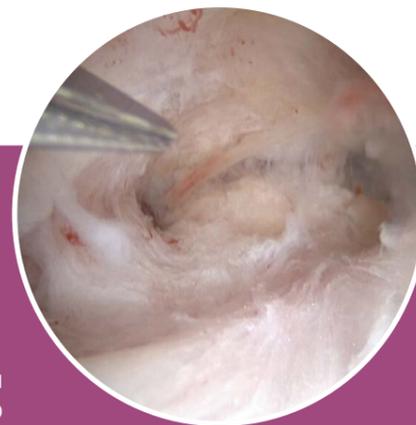

## Эффективность 7 Fr.<sup>1</sup>

Лезвия ножниц 7 Fr. на 50% длиннее<sup>2</sup> чем лезвия ножниц 5 Fr., объем материала изъятый биопсийными щипцами 7 Fr. в 3 раза больше<sup>3</sup> чем у щипцов 5 Fr. ! Инструменты 7 Fr. в действительности более жесткие и более точные чем 5 Fr. Вы экономите время и повышаете комфорт пациента.

<sup>1</sup>: 1 мм = 3 Fr.

<sup>2</sup>: 5,7 мм против 3,8 мм

<sup>3</sup>: 8,23 мм<sup>2</sup> против 3,2 мм<sup>2</sup>

# Набор EasyCare+ (арт. D400 100 017)

СОСТОИТ ИЗ:

## HD гистероскоп 2,9 мм, 30°

Автоклавируемый. Длина: 300 мм

Арт. D300 100 000



## Градуиров. диагностический тубус 4 мм

Вращающийся краник. Длина: 270 мм

Арт. D300 110 002



## Внутр. градуиров. операционный тубус 4,9 мм

Операционный канал 7Fr. Вращающийся краник. Длина: 230 мм

Арт. D300 110 001



## Внешний градуиров. операционный тубус 5,5 мм

Вращающийся краник. Quick lock. Длина: 216 мм

Арт. D300 110 000



## Градуированные ножницы 7 Fr.

Полу-жесткие. Вращающиеся. С портом для промывки  
Длина: 370 мм. Одна подвижная бранша

Арт. D300 120 065



NEW

## Градуированные тупоконечные ножницы 7 Fr.

Полу-жесткие. Вращающиеся. С портом для промывки  
Длина: 370 мм. Одна подвижная бранша

Арт. D300 120 066



NEW

## Градуированные биопсийные щипцы 7 Fr.

Полу-жесткие. Вращающиеся. С портом для промывки  
Длина: 370 мм. Две подвижные бранши

Арт. D300 120 067



NEW

## Градуированные щипцы (аллигатор) 7 Fr.

Полу-жесткие. Вращающиеся. С портом для промывки  
Длина: 370 мм. Две подвижные бранши

Арт. D300 120 068



NEW

## Градуированные захватывающие щипцы IUD 7 Fr.

Полу-жесткие. Вращающиеся. С портом для промывки  
Длина: 370 мм. Две подвижные бранши

Арт. D300 120 069



NEW

## Световод

Автоклавируемый. Ø:3,5 мм. Длина: 2,3 м. С коннекторами Storz

Арт. D200 150 500



## Стерилизационная корзина EasyCare

Автоклавируемая. 540x240x70 мм. С силиконовыми держателями

Арт. D200 160 522



## Дополнительные принадлежности:

### Биполярный электрод. Гибкий. Тип: кнопка, 5 Fr.

Арт. D300 140 010



### Биполярный электрод. Гибкий. Тип: игла, 5 Fr.

Арт. D300 140 011

