



imaging all the women



iFlow mini

Непрерывный поток,
безупречное лечение



Ирригационная помпа с постоянным давлением

Специально разработана для гинекологии


Где бы вы ни использовали её - в амбулатории или в операционной - iFlow mini удовлетворит любые ваши потребности. Благодаря своей компактности она станет незаменимым помощником в условиях ограниченного пространства. В операционной вы получите комплексное решение для ирригации, включающее две важнейшие программы: гистероскопию и лапароскопию. Не смотря на свою удивительной простоту, данная помпа остается мощным решением для любых задач.



Технические инновации на службе у визуализации

В основе iFlow mini лежит простая и эффективная технология ирригации. Пакеты с жидкостью вставляются в манжеты. Они автоматически надуваются насосом, на выходе получаем непрерывный поток и постоянное давление, что является необходимым условием для получения оптимального качества изображения.

Внесите данные о высоте пациента, чтобы обеспечить надежную индикацию давления и, таким образом, получить расширение матки в соответствии с вашими ожиданиями.

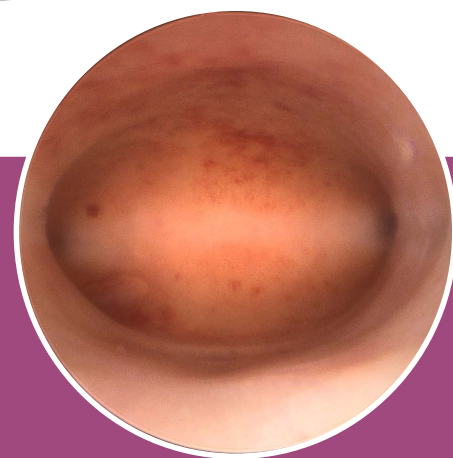

Подставка встроена в тележку
Просто повесьте манжеты на подставку. Легко регулировать высоту в соответствии с вашими потребностями!

Y-адаптер
Переход от одного пакета с жидкостью к другому осуществляется легко и плавно, обеспечивая бесперебойную работу.

Простая установка трубок
Подключите ирригационную трубку одной рукой за считанные секунды!

Компактное и законченное решение
Мы разработали нашу тележку, чтобы удовлетворить любые ваши потребности на уменьшенной площади, сохраняя при этом высокую устойчивость.



Программа гистероскопии
Установите давление в диапазоне от 60 до 200 мм рт. ст. Это единственная настройка, которую необходимо сделать в начале процедуры. iFlow mini позаботится обо всем остальном.

Программа лапароскопии
Скорость потока до 1 л/мин!

Возможность вакуумного отсоса
Регулируйте мощность всасывания (два уровня) с максимальным показателем 2 л/мин.

В комплект входит рельс для контейнеров
Разместите на тележке до четырех контейнеров одновременно и тем самым оптимизируйте пространство в комнате.

Надежное решение для гистероскопии

Поскольку внутриматочное давление является ключевым элементом гистероскопии, встроенный датчик давления производит высокоточные измерения. Давление легко отслеживать с помощью дисплея.

Также предусмотрены различные виды сигнализации, предупреждающие персонал о превышении давления.

iFlow mini аксессуары, артикулы и характеристики:

iFlow mini. Ирригационная помпа. Гистероскопия и лапароскопия

Программа гистероскопии:

- Диапазон установки давления: 60 - 200 мм рт. ст.
- Диапазон измерения давления: 60 - 250 мм рт. ст. ± 15 мм рт. ст.

Максимальная мощность всасывания: 50 кПа

Источник питания: (100-230 В~ ; 50/60 Гц)

Потребляемая мощность: 36 ВА

Размеры: 185 x 230 x 130 мм

Вес: 2,0 кг

Защита: CF тип



Полный комплект, включающий:

- iFlow mini. Только ирригационная помпа
- 2 x Манжеты давления (по вашему выбору)
- Y-адаптер для подключения двух манжет
- Трубка для самодиагностики датчика iFlow mini

Арт. D400 100 600

Только ирригационная помпа.

Арт. 110 100 012

Манжеты давления:

Манжета 3 л
275 x 465 мм

Арт. D110 100 020

Манжета 3 л. Длинная версия.
275 x 535 мм

Арт. D110 100 013

Манжета 1 л
160 x 415 мм

Арт. D110 100 014

Трубки:



Стерильная ирригационная трубка

Одноразовая. 2 иглы.
Поставляется по 15 шт.

Арт. D110 100 016



Стерильная отсасывающая трубка

Одноразовая. 2 коннектора.
Поставляется по 15 шт.

Арт. D110 100 022



Отсасывающая вакуумная трубка

С фильтром. Не стерильная.
На 30 дней использования

Арт. D110 100 017

Тележка для ирригационной системы:



Комплект тележки iFlow mini, без полки, включающий:

- 2 x Держатель контейнеров Serres с направляющей
- 2 x Контейнеры Serres 3 л - без крышки
- 2 x Одноразовый отсасывающий мешок Serres с крышкой
- Т-клапан для последовательного соединения контейнеров Serres
- Отсасывающая трубка Tandem для контейнеров Serres, одноразовая
- Вакуумная трубка Tandem для последовательного соединения контейнеров Serres

Арт. D200 100 503