




*imaging all the women**

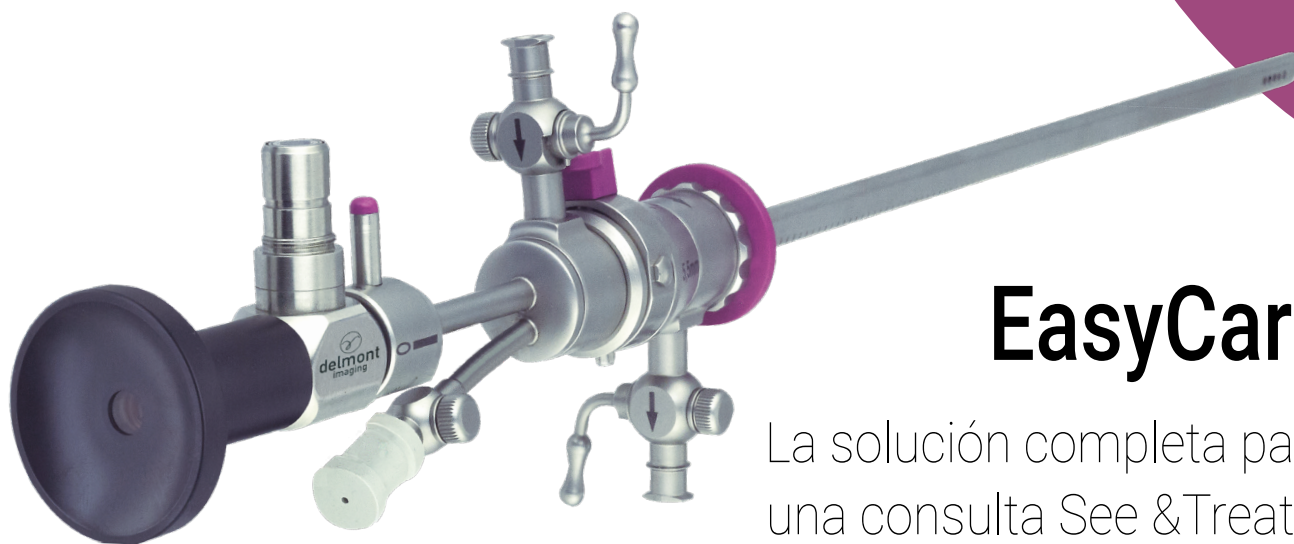

EasyCare

La solución completa para
una consulta See & Treat**
sin preocupaciones


Según el Pr. H. Fernández



«Muchos procedimientos pueden realizarse en la consulta durante una histeroscopia diagnóstica, evitando así que sus pacientes tengan que volver para ser hospitalizadas y, en consecuencia, anestesiadas. Esta es una de las muchas ventajas de See & Treat, junto con la atención inmediata al paciente y la reducción del número de visitas a quirófano que exigen los procedimientos más complejos. La codificación será idéntica si el paciente es ambulatorio. Para poder llevar a cabo See & Treat con total tranquilidad, necesita un equipo completo y de alto rendimiento. Esto es lo que ofrece la solución EasyCare, con un set de camisas y, sobre todo, un instrumental de 7Fr mucho más eficiente que el tradicional de 5Fr. El procedimiento es preciso, el resultado inmediato y el paciente queda satisfecho».

Pr. Hervé Fernandez. Presidente del Consejo Científico de Delmont imaging. Experto en histeroscopia de renombre mundial.

EasyCare. Un set, tres herramientas posibles.

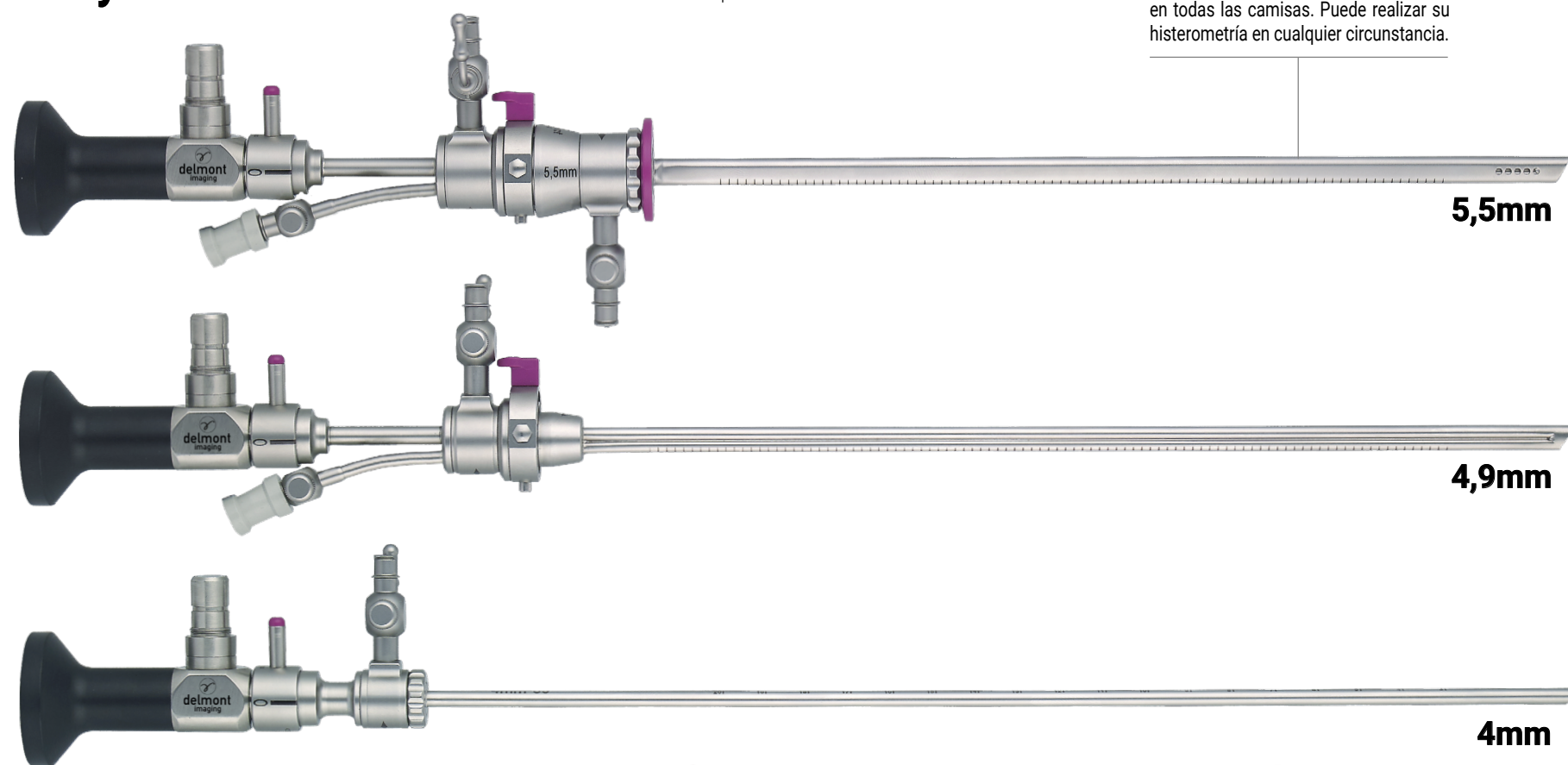

Marcado centimétrico

El marcado centimétrico está presente en todas las camisas. Puede realizar su histerometría en cualquier circunstancia.


Camisa interna atraumática de 4,9mm

Con su punta completamente embotada y su diámetro aún más pequeño, la camisa interna ha sido diseñada para ser utilizada sin la camisa externa. Es la herramienta ideal para los procedimientos que no requieren aspiración, como la extracción de dispositivos intrauterinos o la sección de sinequias de tipo 1 o 2.



Grifería giratoria

Para no estorbar nunca y estar siempre en la mejor posición, gire cada grifo de forma independiente.

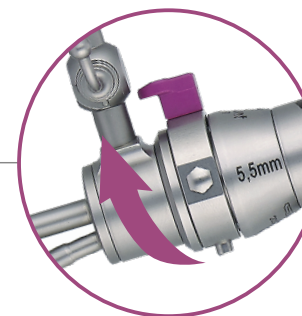

Bloqueo rápido

Se acabaron los cierres lentos.

Instrumentos rotatorios semirrígidos

Nuestros instrumentos incluyen un nuevo módulo de rotación que facilita su uso y reduce considerablemente el riesgo de torsión. De este modo, mejoran su comodidad y la vida útil de sus instrumentos.





Diseñado hasta el último detalle

Se han simplificado todas las fases de uso del producto: el montaje y desmontaje del mango se realiza con un solo movimiento gracias al sistema de cierre rápido, y la limpieza se facilita gracias a un canal Luer-lock ultra accesible.

Histeroscopio HD: rendimiento inigualable y duración garantizada

Nuestra última generación de ópticas, diseñadas para aprovechar al máximo la alta definición, ofrece imágenes ricas y perfectamente resueltas, incluso en la parte periférica. Esta hiperresolución, unida a una distribución verdaderamente uniforme de la luz, le garantiza una gran profundidad de campo. ¡Estará «nítido en cualquier parte»! Nuestro histeroscopio HD es, por supuesto, autoclavable. Su diseño en forma de tres tubos separados lo hace resistente y duradero, pero también fácil de reparar en caso de accidente.

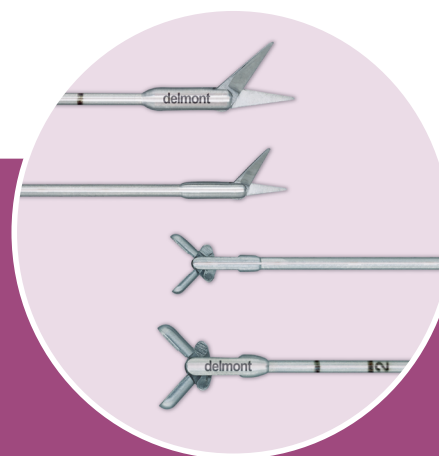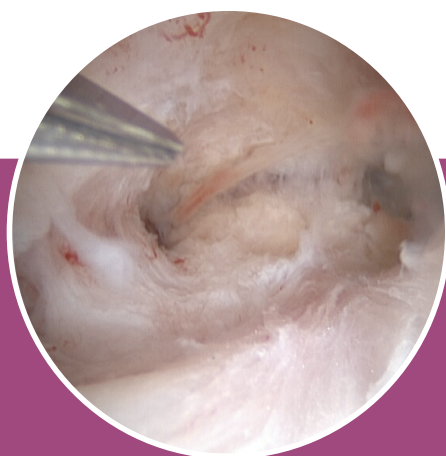

¡La eficiencia de 7Fr.¹!

Las láminas de las tijeras de 7Fr. son un 50% más largas² que las de 5Fr. El volumen de las pinzas de biopsia de 7Fr. es casi tres veces mayor³ que el de sus homólogos de 5Fr. El instrumental de 7Fr es naturalmente más rígido y, por lo tanto, más preciso que el de 5Fr. También en este caso se gana en velocidad para mayor comodidad del paciente.

¹: 1mm = 3Fr.

²: 5,7mm vs 3,8mm

³: 8,23mm³ vs 3,2mm³

El set completo **EasyCare+** - Ref. D400 100 047 incluye los siguientes elementos :

Histeroscopia HD. 2,9mm. 30°

Autoclavable. L:300mm

Ref. D300 100 000



Camisa diagnóstico graduada. 4mm

Grifo de irrigación giratorio. L:270mm

Ref. D300 110 002



Camisa operatoria interna graduada. 4,9mm

Canal quirúrgico 7Fr. Grifo de irrigación rotatorio. L:230mm

Ref. D300 110 001



Camisa operatoria externa graduada. 5,5mm

Grifo de aspiración giratorio. Conexión rápida. L:216mm

Ref. D300 110 000



Par de tijeras de punta graduada. 7Fr.

Semirrígidas. Giratoria. Con canal de limpieza L:370mm. 1 mordaza móvil

Ref. D300 120 065



Par de tijeras redondeadas graduadas. 7Fr.

Semirrígidas. Giratoria. Con canal de limpieza L:370mm. 1 mordaza móvil

Ref. D300 120 066



Pinza de biopsia graduada. 7Fr.

Semirrígidas. Giratoria. Con canal de limpieza L:370mm. 2 mordazas móviles

Ref. D300 120 067



Pinza de agarre graduada (alligator). 7Fr.

Semirrígidas. Giratoria. Con canal de limpieza L:370mm. 2 mordazas móviles

Ref. D300 120 068



Pinza de extracción graduada (DIU). 7Fr.

Semirrígida. Giratoria. Con canal de limpieza L:370mm. 2 mordazas móviles

Ref. D300 120 069



Cable de luz

Autoclavable. Ø:3,5mm. Longitud: 2,3m. Se entrega con tapones Storz

Ref. D200 150 500



Cesta de esterilización

Autoclavable. 540x240x70mm. Con soportes de silicona a medida

Ref. D200 160 522



Accesorios opcionales :

Electrodo bipolar flexible 5 Fr. tipo botón

Ref. D300 140 010



Electrodo bipolar flexible 5 Fr. tipo punta

Ref. D300 140 011

