




*imaging all the women**



ReseCare

Deux modèles de
résecteurs 6mm et le
respect de toutes les femmes

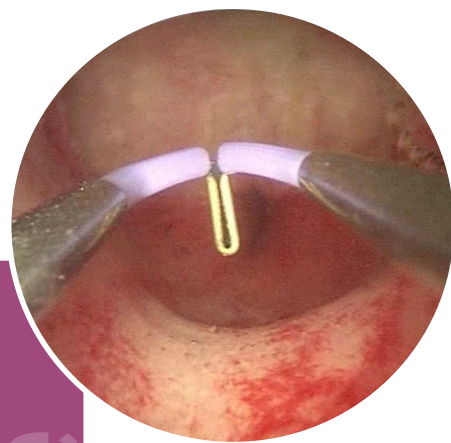


Un résecteur de 18,5Fr. seulement

Petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente. Avec **ReseCare**, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.

ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

"Après trois années d'utilisation continue, on ne peut plus se passer de ReseCare ! Il est plus rapide, plus simple et moins traumatique."
Pr. Hervé Fernandez, FRANCE Président du conseil scientifique de Delmont imaging. Expert mondialement reconnu en hystérocopie.

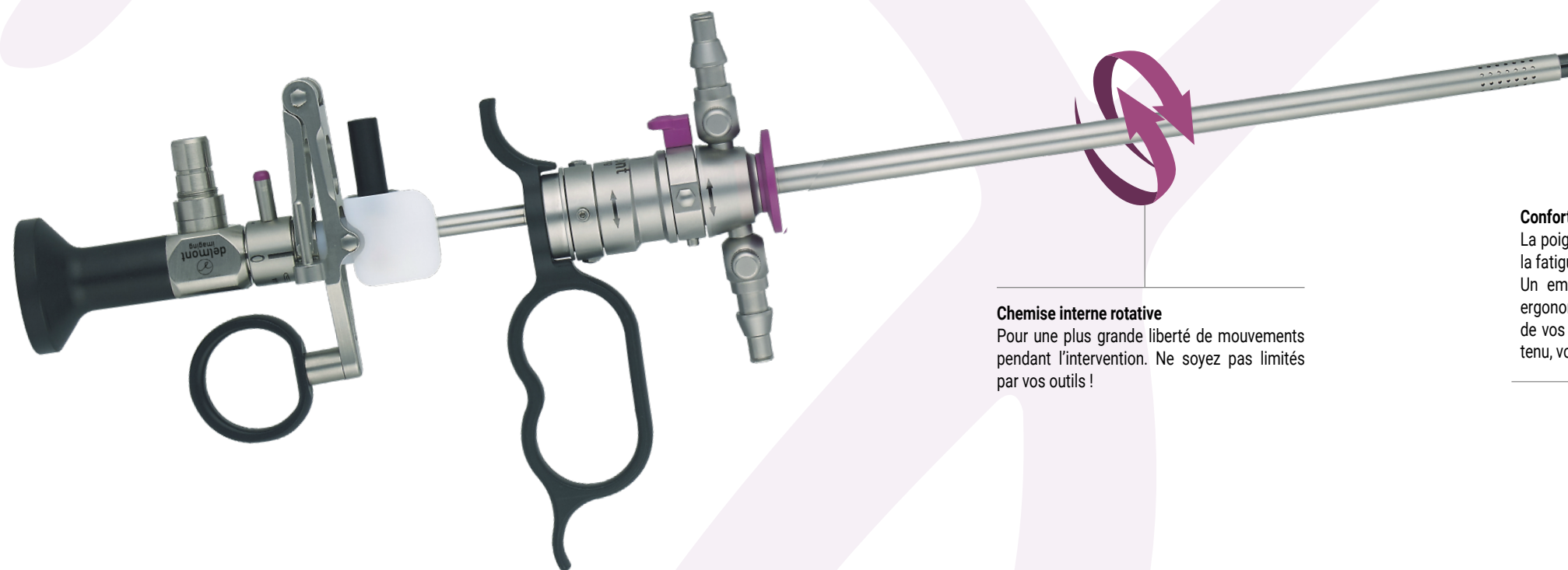


Chemise interne rotative

Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !


La qualité dans les moindres détails

Une bonne image passe aussi par un couple « aspiration-irrigation » maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.

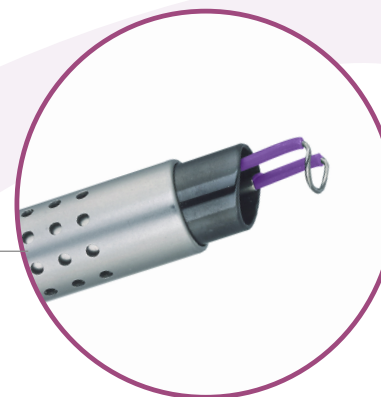

Encliquetage rapide

La fin des verrouillages laborieux !

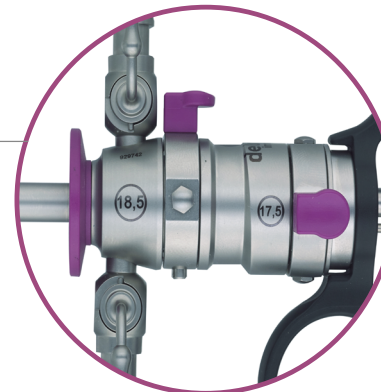



Confort et précision assurés

La poignée en PEEK, ultra-légère, évite la fatigue pendant l'intervention. Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.




Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez « net partout » ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

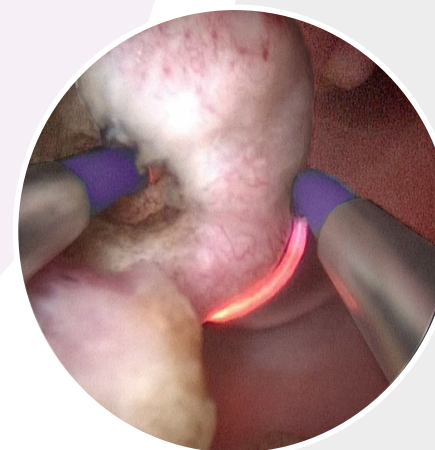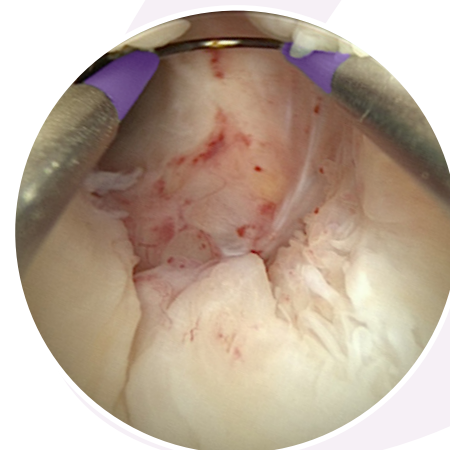

La résection bipolaire

Les avantages de cette technologie reposent sur deux éléments. Tout d'abord, le courant ne traverse plus la patiente pour revenir au générateur, mais revient directement par le résecteur lui-même, réduisant les risques de brûlures et de synéchies. Mais aussi et surtout, un résecteur monopolaire se doit d'utiliser du glycolle dont l'absorption par la patiente est source de troubles ioniques. Par opposition, un résecteur bipolaire utilise du sérum physiologique, nullement toxique et moins onéreux. **ReseCare** connecté à un générateur bipolaire vous offre ce surplus de sérénité. Il reste néanmoins **compatible** et fonctionne parfaitement avec tous les générateurs monopolaires.

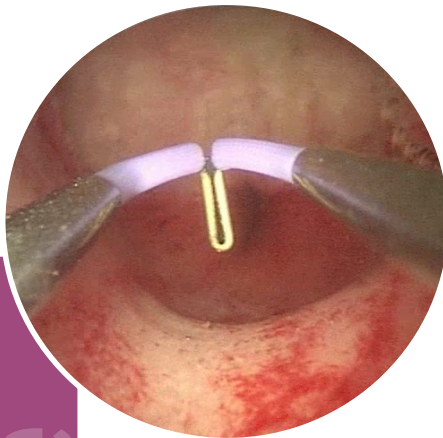


Un résecteur de 18,5Fr. seulement

Petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente. Avec **ReseCare**, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.


ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

"Après trois années d'utilisation continue, on ne peut plus se passer de ReseCare ! Il est plus rapide, plus simple et moins traumatique."
Pr. Hervé Fernandez, FRANCE Président du conseil scientifique de Delmont imaging. Expert mondialement reconnu en hystéroscopie.

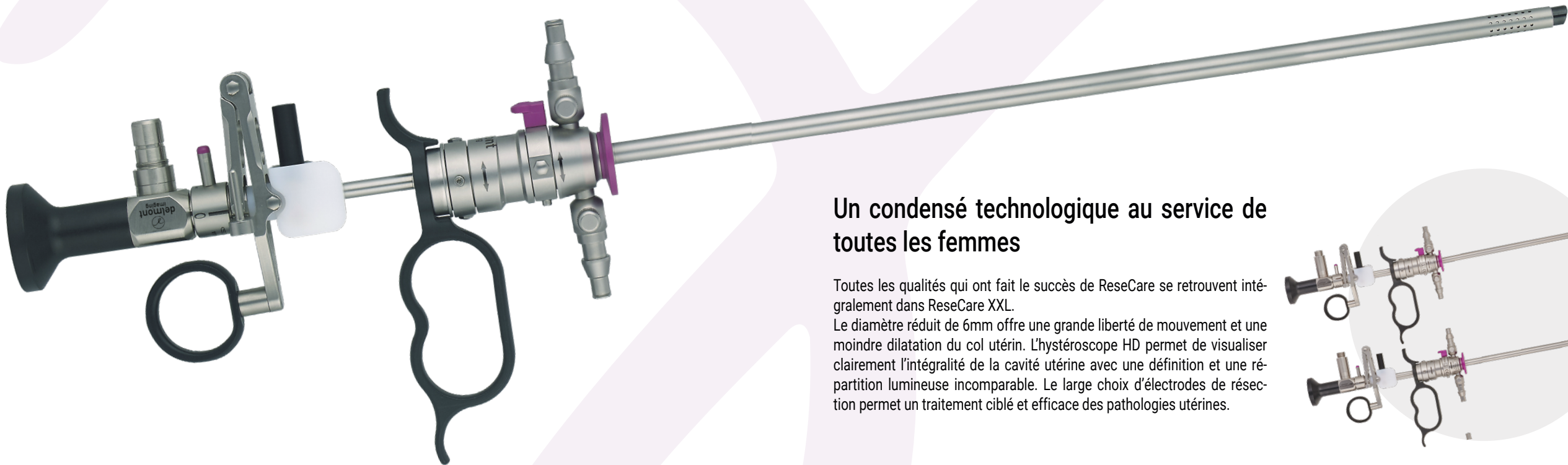

Un condensé technologique au service de toutes les femmes

Toutes les qualités qui ont fait le succès de ReseCare se retrouvent intégralement dans ReseCare XXL. Le diamètre réduit de 6mm offre une grande liberté de mouvement et une moindre dilatation du col utérin. L'hystéroscope HD permet de visualiser clairement l'intégralité de la cavité utérine avec une définition et une répartition lumineuse incomparable. Le large choix d'électrodes de résection permet un traitement ciblé et efficace des pathologies utérines.

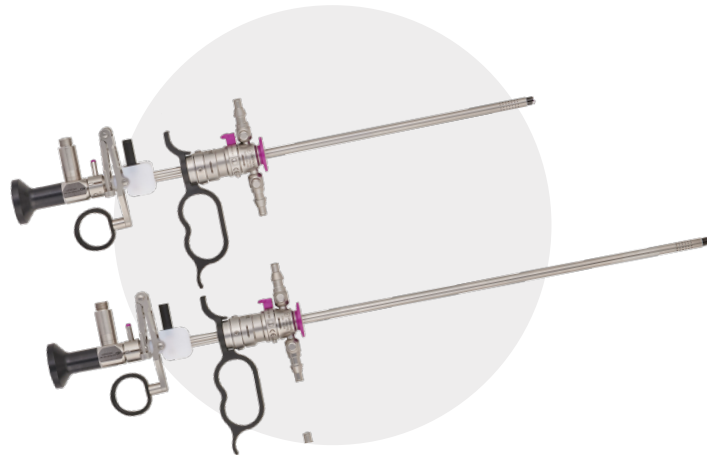


Un set diagnostique également disponible en version XXL

Tout comme ReseCare, le set diagnostique XXL permet d'obtenir une meilleure visibilité des larges cavités utérines ou celles difficiles d'accès. Retrouvez la même qualité d'image hautement définie pour un diagnostic aisé. Aussi bien en diagnostique qu'en opératoire, la longueur et le diamètre de nos nouveaux produits XXL s'adaptent aux besoins de vos patientes.



Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

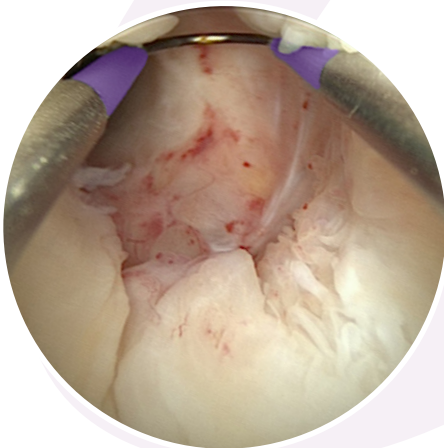

10
cm

ReseCare XXL

Le petit dernier de la gamme qui a déjà tout d'un grand !

C'est la longueur qui différencie ReseCare XXL de ReseCare, et qui va vous permettre de traiter vos patientes présentant un utérus de grande taille ou une surcharge pondérale limitant une utilisation rapprochée du col utérin. Unique sur le marché, sa longueur utile de 287mm permet d'aborder aisément toutes les cavités utérines, notamment les régions péri-ostiales ou du fond utérin, là où un résecteur habituel échouerait.

Ce nouveau produit est la solution parfaite qui prend en considération les singularités de toutes les femmes sans compromettre le confort du chirurgien. Il répond à un besoin actuel de tous les centres de soins en équipement spécialisé, et qui à l'avenir, tend à s'accroître.

Le set **ReseCare XXL** : Réf. D400 100 037 comprend les éléments suivants :

Hystéroscope HD. 2,9mm. 12°

Autoclavable. L.395mm

Réf. D300 100 087



Chemise externe 18,5Fr.

Version XXL. Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 088



Chemise interne 17,5Fr.

Version XXL. Rotative

Réf. D300 130 089



Electrodes réutilisables :

Description	Référence
Electrode coupante 30° - XXL	D300 140 086
Electrode coupante droite - XXL	D300 140 087
Electrode couteau - XXL	D300 140 088
Electrode rouleau - XXL	D300 140 089
Electrode de vaporisation - rouleau à pointes- XXL	D300 140 122

Accessoires :

Obturateur

Version XXL. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 091



Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes


Réf. D200 160 034



Panier de stérilisation ReseCare XXL

Autoclavable. 540x240x70mm. Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 504

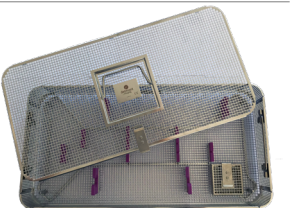

Set diagnostique :

Hystéroscope HD. 2,9mm. 30°

Autoclavable. L.395mm

Réf. D300 100 088



Chemise diagnostique 4mm

Version XXL. Pour hystéroscope 12° ou 30°

Réf. D300 110 072



Panier de stérilisation pour deux instruments

492x134x65mm. Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 507



Le set **ReseCare** - Réf. D400 130 026 comprend les éléments suivants:

Hystéroscope HD. 2,9mm. 12°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 004



Chemise externe 18,5Fr.

Double flux. Encliquetage rapide

Réf. D300 130 000



Chemise interne 17,5Fr.

Rotative

Réf. D300 130 001



Elément de travail à action passive

Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires


Réf. D300 130 002



Elément de travail à action active

Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires

Réf. D300 130 009

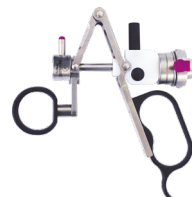

Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz

Réf. D200 150 500



Electrodes :

Description	Référence	
	Stérile, à usage unique (Livrées par boîte de 10)	Réutilisable (Livrées par boîte de 4)
Electrode coupante 30°	D300 140 067	D300 140 000
Electrode coupante droite	D300 140 068	D300 140 001
Electrode couteau	D300 140 069	D300 140 002
Electrode rouleau	D300 140 070	D300 140 003
Electrode de vaporisation - rouleau à pointes	D300 140 091	D300 140 090

Accessoires :

Obturbateur

Encliquetage rapide

Réf. D300 130 003



Tube de stérilisation

Autoclavage et stockage des électrodes

Réf. D200 160 003



Panier de stérilisation ReseCare

Autoclavable. 540x240x70mm. Avec support en silicone personnalisés

Réf. D200 160 504



Câble de résection bipolaire iSpark

Connexion SDS

Réf. D200 190 007

Câble de résection bipolaire. Erbe

VIO300D & VIO3

Réf. D200 190 001