




*imaging all the women**

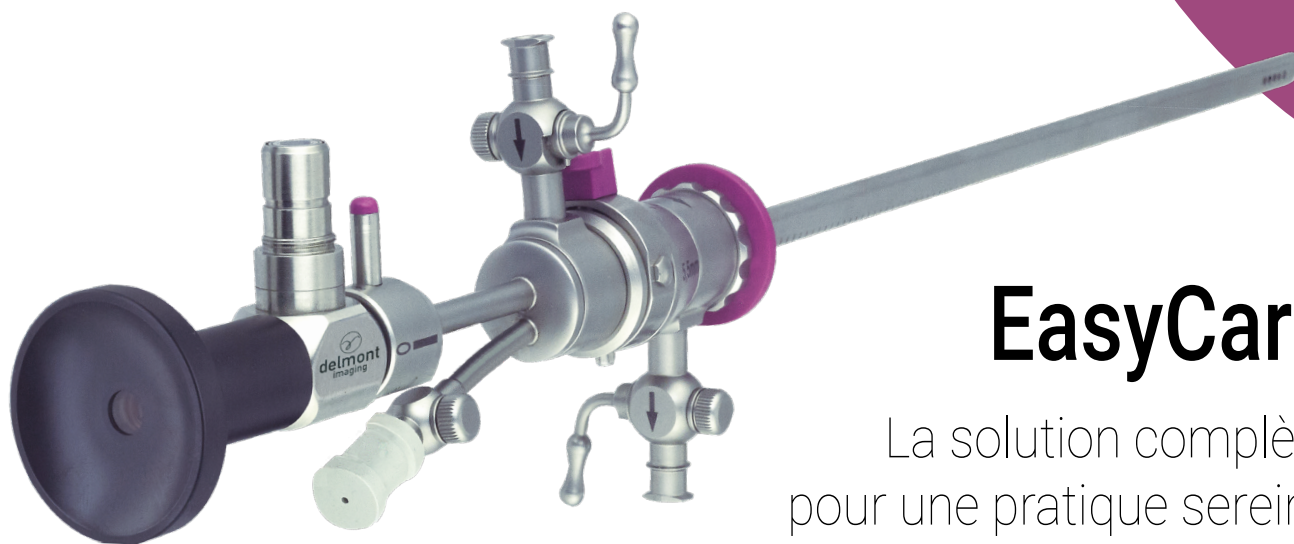

EasyCare

La solution complète
pour une pratique sereine
du See&Treat**


D'après le Pr. H. Fernandez



« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystéroscopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution **EasyCare** avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. »

Pr. Hervé Fernandez, Président du conseil scientifique de Delmont imaging. Expert mondialement reconnu en hystéroscopie.

EasyCare. Un set, trois outils possibles.

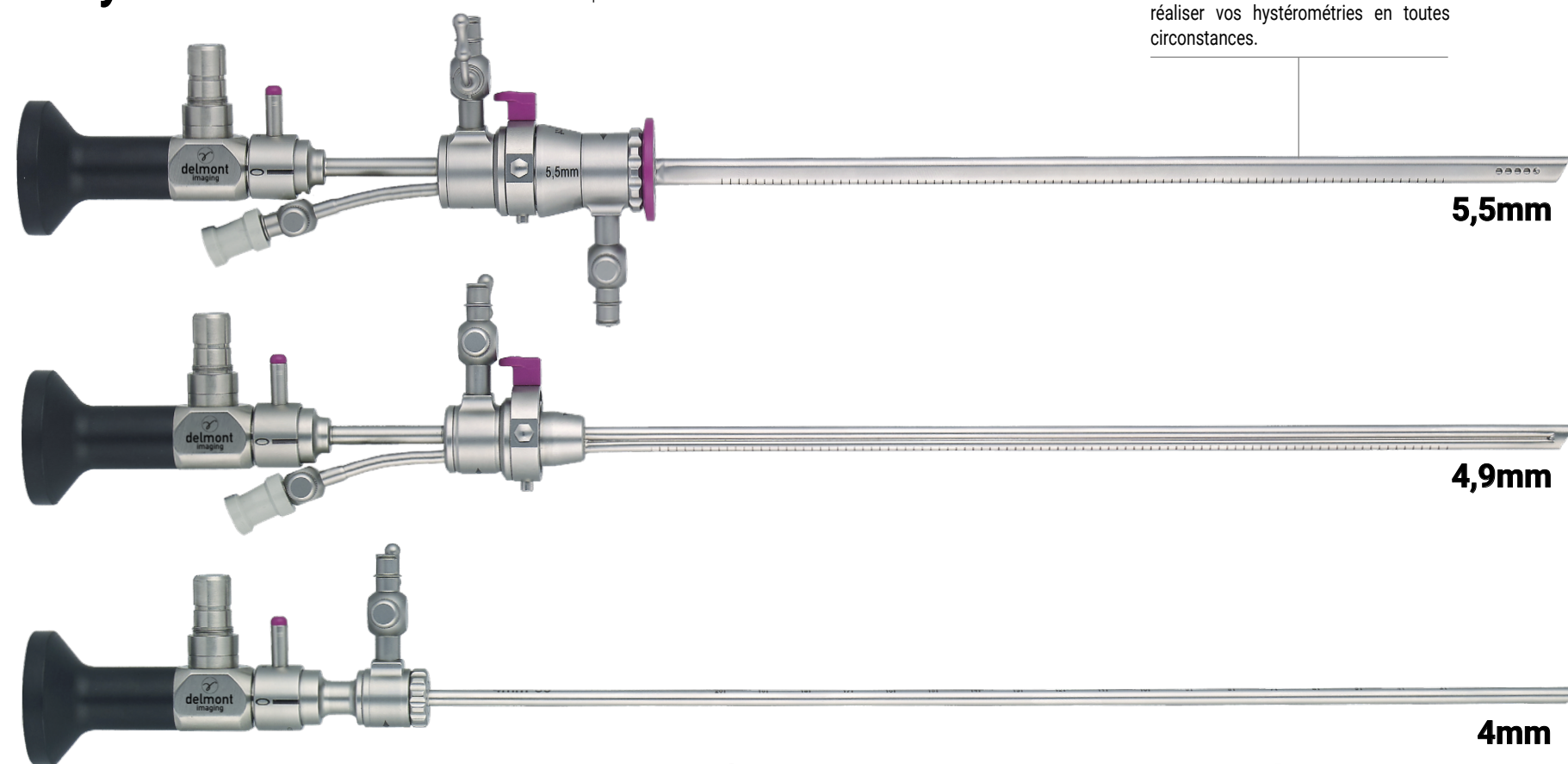

Marquage centimétrique

Le marquage centimétrique est présent sur toutes les chemises. Vous pourrez réaliser vos hystérométries en toutes circonstances.


Chemise interne atraumatique de 4,9mm

Avec son extrémité totalement émoussée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.



Robinet rotatifs

Pour que vous ne soyez jamais gênés et toujours dans la meilleure position, orientez chaque robinet indépendamment.

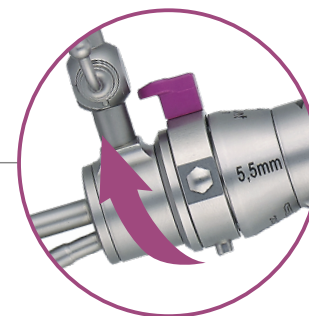

Encliquetage rapide

La fin des verrouillages laborieux !

Instruments semi-rigides rotatifs

Nos instruments incluent un nouveau module de rotation facilitant l'utilisation et diminuant grandement les risques de torsion. Votre confort et la durée de vie de vos instruments sont ainsi améliorés.





Pensé jusqu'au moindre détail

Toutes les phases d'utilisation du produit sont simplifiées : le montage et démontage de la poignée en un geste via l'encliquetage rapide tout comme le nettoyage grâce à un canal Luer-lock ultra-accessible.

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez « net partout » ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

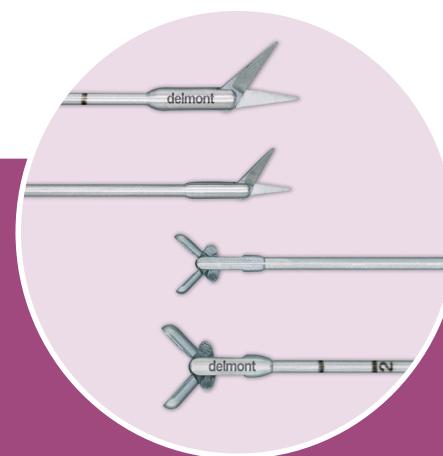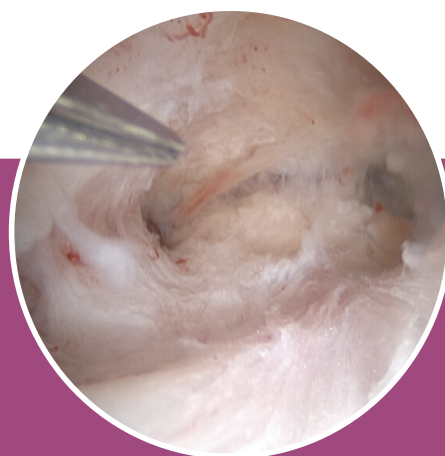

L'efficacité du 7Fr.¹ !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues² que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur³ à son homologue en 5Fr. ! L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr. Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

¹: 1mm = 3Fr.

²: 5,7mm vs 3,8mm

³: 8,23mm³ vs 3,2mm³

Le set **EasyCare+** complet - Réf. D400 100 047 comprend les éléments suivants :

Hystéroscope HD. 2,9mm 30°

Autoclavable. L:300mm

Réf. D300 100 000



Chemise diagnostique graduée. 4mm

Robinet d'irrigation rotatif. L:270mm

Réf. D300 110 002



Chemise opératoire interne graduée. 4,9mm

Canal opératoire 7Fr. Robinet d'irrigation rotatif. L:230mm

Réf. D300 110 001



Chemise opératoire externe graduée. 5,5mm

Robinet d'aspiration rotatif. Encliquetage rapide. L:216mm

Réf. D300 110 000



Poignée complète

Pour tige semi-flexible avec module de rotation.

Réf. D300 120 070



Paire de ciseaux pointus graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage L:370mm. 1 mors mobile. Tige uniquement.

Réf. D300 120 076



Paire de ciseaux arrondis graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage L:370mm. 1 mors mobile. Tige uniquement.


Réf. D300 120 077



Pince à biopsies graduée. 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage L:370mm. 2 mors mobiles. Tige uniquement.

Réf. D300 120 079

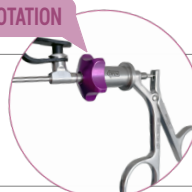

Pince à préhension graduée (alligator). 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage L:370mm. 2 mors mobiles. Tige uniquement.

Réf. D300 120 078



Pince à extractions graduée (DIU). 7Fr.

Semi-rigide. Rotatif. Avec canal de nettoyage L:370mm. 2 mors mobiles. Tige uniquement.

Réf. D300 120 080



Câble de lumière

Autoclavable. Ø 3,5mm. L: 2,3m. Fourni avec embouts Storz.


Réf. D200 150 500



Panier de stérilisation EasyCare

Autoclavable. 540x240x70mm. Avec supports en silicone personnalisés

Réf. D200 160 522

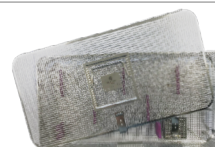

Accessoires optionnels

Electrode bipolaire flexible 5Fr. de type bouton.

Réf. D300 140 010



Electrode bipolaire flexible 5Fr. de type pointe.

Réf. D300 140 011

