



*imaging all the women**




NOUVEAU

La colposcopie réinventée

Plus d'innovation.
Moins de contraintes.


delmont
imaging

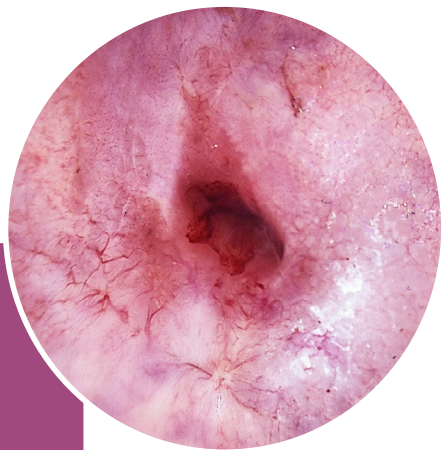

L'innovation au service du produit

Une qualité d'image qui redéfinit l'expérience de la colposcopie

Nous avons toujours placé la qualité optique, composante primordiale pour l'examen et le diagnostic, au cœur de nos colposcopes. Avec cette nouvelle génération, nous franchissons un cap supplémentaire : nos lentilles apochromatiques vous offrent une restitution précise et une image d'une fidélité sans compromis. Au-delà de l'optique, c'est l'ensemble du colposcope qui a été repensé pour aller plus loin que ce que vous connaissiez jusqu'ici. Notre caméra iCare mini et notre logiciel imagyn complètent cette solution avec une capture d'image et des comptes-rendus aussi intuitifs que complets.



Conçu pour votre confort, pensé pour votre quotidien

L'ergonomie du colposcope, grâce à son bras pantographique, permet un positionnement fin et précis de la tête du colposcope d'une seule main, sans effort. Le câblage entièrement intégré au bras réduit les risques de casse et participe à un design épuré, à la hauteur d'un équipement premium. Pour une solution encore plus complète, un moniteur peut être directement intégré au colposcope, pour une vision directe de la capture d'image, sans encombrer votre espace de travail.



5 niveaux de grossissement intégrés

De la vision panoramique au détail le plus fin, adaptez votre grossissement à chaque temps de l'examen. Les cinq niveaux sont toujours disponibles sur notre colposcope, avec une qualité optique constante du premier au dernier.

Notre Variofocus, 21 à 50cm de liberté

Fini les micro-ajustements de position : une plage de mise au point étendue qui s'adapte à votre besoin. Restez net de l'entrée du vagin jusqu'au col sans reculer ni avancer le colposcope. Passez vos instruments directement dans l'axe optique : plus de biais, plus d'inconfort dans le geste.

Le filtre vert, pour une lecture vasculaire affûtée

En un geste depuis la tête du colposcope, rehaussez le contraste entre muqueuse et vaisseaux sanguins. Mosaïques, ponctuations, zones hypervascularisées : chaque détail clinique gagne en lisibilité.

Le diaphragme, notre innovation exclusive

Ajustez la surface éclairée sans en modifier l'intensité lumineuse : fini les reflets sur le spéculum qui perturbent la visualisation. Concentrez le faisceau sur une zone précise afin de se focaliser sur les détails et obtenir des photos cliniques plus nettes.

Notre source LED, puissante et silencieuse

Intégrée à la tête du colposcope, elle se pilote du bout des doigts, sans quitter des yeux la zone d'examen. Sa température de couleur naturelle à 5 500 K garantit un rendu fidèle des muqueuses pour une appréciation précise des zones suspectes.



Une nouvelle façon d'aborder vos comptes-rendus de colposcopie !

Dotée d'un capteur CMOS HD, notre caméra iCare mini s'intègre directement au colposcope pour la capture de photos et vidéos de vos examens, sans encombrer votre espace de travail. Associée à imagyn, notre application développée pour iPad Pro disponible sur l'App Store, elle forme une solution complète et intuitive pour la gestion de vos examens de colposcopie. De la création de la fiche patiente au partage du compte-rendu, chaque étape a été pensée pour s'intégrer naturellement à votre pratique quotidienne.

Parce que la documentation fait partie intégrante de votre exercice, ce duo a été conçu pour vous faire gagner du temps sans jamais sacrifier la qualité de vos comptes-rendus.




L'examen en temps réel sur l'iPad Pro

Le flux vidéo est diffusé en direct sur l'iPad Pro pendant l'examen, via le Wi-Fi privé et sécurisé d'iCare mini. Orientez l'écran vers votre patiente pour lui expliquer l'examen en direct, ou utilisez-le simplement comme écran de contrôle.

Un compte-rendu complet en quelques clics !

Tout a été pensé pour transformer la rédaction du compte rendu en une expérience rapide et intuitive, sans sacrifier sa qualité ni son exhaustivité. En quelques clics, finalisez un document structuré comprenant schémas anatomiques à annoter, photos de l'examen à légender et plus d'une dizaine de champs texte. Un compte-rendu à la hauteur de votre pratique, rapidement prêt à être partagé avec votre patiente ou vos confrères.

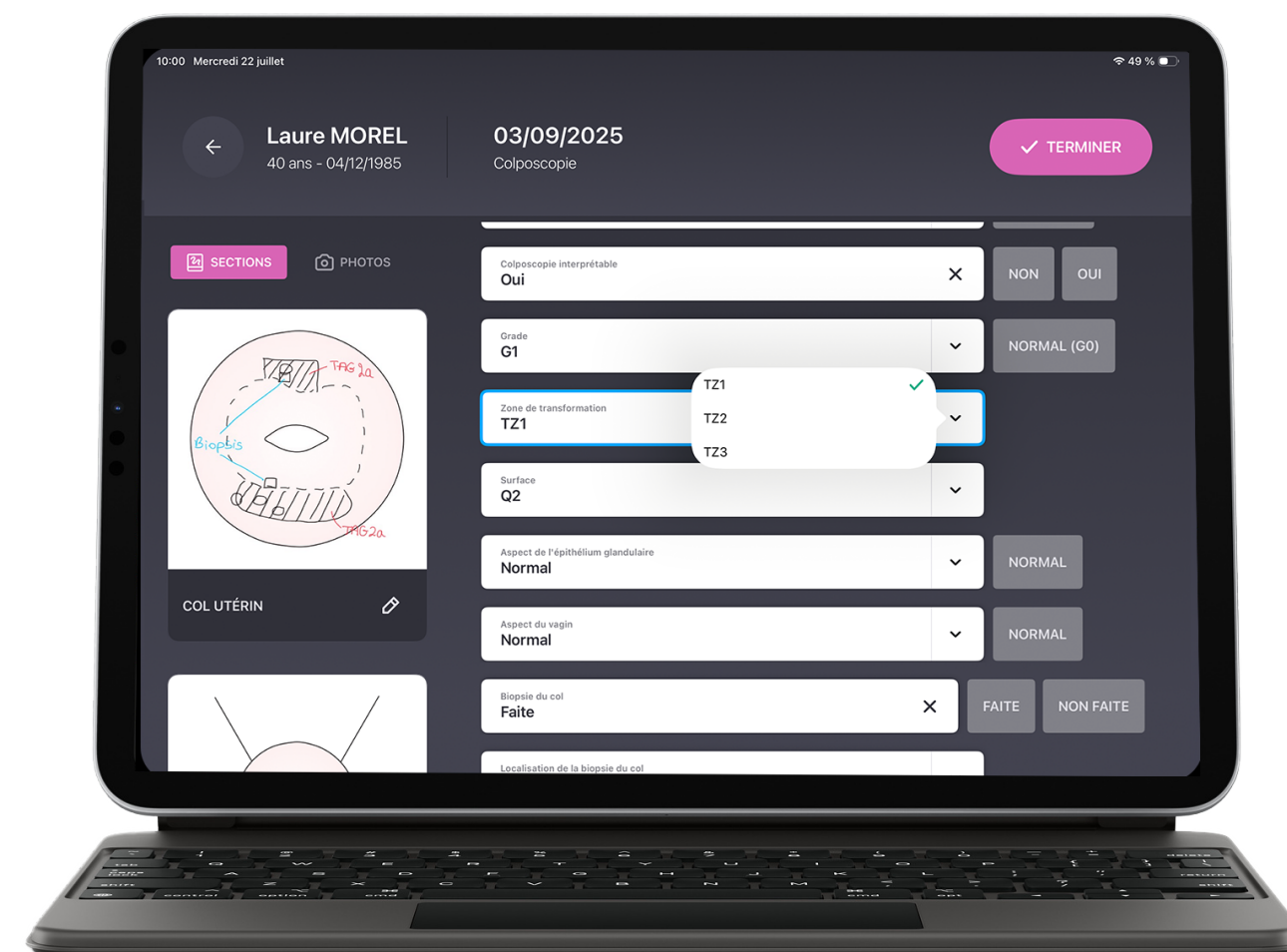

En clinique ou à l'hôpital, imagyn s'adapte à vos besoins

Partagez les comptes rendus d'examen sur le réseau afin qu'ils s'intègrent automatiquement aux dossiers patients informatisés (DPI) via le protocole standardisé HL7. La Worklist (liste des patients du jour) peut également être transmise à imagyn par votre centre de soins via la norme DICOM, vous évitant de créer chaque fiche patient manuellement.

Références et caractéristiques de notre Colposcope :

5 grossissements : 0,4x ; 0,63x ; 1,0x ; 1,6x ; 2,5x
Champ de vision à 30cm : 96mm, 61mm, 39mm, 24mm, 15mm
Poids : 60kg
Hauteur ajustable : de 855 à 1 365mm
Portée horizontale : 1 120mm

Spécifications :

Lumière : LED 120 000 lux
Lentilles apochromatiques
Oculaire : 12,5x
Binoculaire à 45°
Diaphragme
Filtre vert

Avec objectif fixe de 300mm
Plage de netteté fine de 11mm

Réf. D100 300 600

Avec objectif à focale variable
F=210 à 500mm

Réf. D100 300 601



Accessoires optionnels :

Adaptateur pour caméra vidéo

Compatible monture C et CS
Pour iCare et iCare mini

Réf. D100 300 100



iCare mini

Caméra de colposcopie avec capteur CMOS HD
Connectique monture CS
1 sortie vidéo mini HDMI

Réf. D100 300 550



Support moniteur

Pour colposcope bras pivotant

Réf. D100 300 109



Moniteur Neovo 22"

Pour colposcope bras pivotant

Réf. D200 110 000



iPad Pro® 12,9" 256Go

Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048
Fourni avec son clavier et son stylet

Réf. D100 200 500



Licence imagyn

Application de gestion de base de données pour la colposcopie.
Sans option. Compte-rendu générique seulement. Valable 1 an

Réf. D100 200 125



Activation de la colposcopie

Activation des comptes-rendus de colposcopie

Réf. D100 200 127

Activation de l'interopérabilité

Récupération Worklist via DICOM, renvoi PDF via HL7

Réf. D100 200 128